



Note:
The Head for the massage gun comes with a lithium-ion battery, please make sure to charge the battery before use with the included USB-A to USB-C cable.

Please read the instructions carefully before using the Massage Head.

Product specifications

Battery capacity	800 mAh
Battery type	Rechargeable lithium-ion battery, non-replaceable
Charging time	2.5 hours
Applicable charger	5V / 2A charger
Heat power	3.7W
Cool power	4.5W
Product size	9.1 x 4.5 x 4.5 cm 3.6 x 1.8 x 1.8 inch
Product weight	120 g 0.26 lb
Maximum temperature (Heat)	Level 1: 40°C Level 2: 45°C
Maximum temperature (Cool)	Level 1: 20°C Level 2: 15°C
Working time (Heat)	Level 1: 2.5 hours Level 2: 2 hours
Working time (Cool)	Level 1: 1 hour Level 2: 40 min

Precautions before use

To reduce the risk of malfunction, electric shock, injury, fire, death, and equipment damage, please read all the instructions and warnings in this manual carefully before using this product.

- Keep away from liquids or heat sources, and keep the vents free of dust.
- After charging is complete, please unplug the power cord.
- Don't use this product while charging.
- Please use this product according to the instructions.
- Before each use, carefully check whether the product can be used normally according to the operation methods of this manual.


WARNING

This product cannot be used under any of the following situations without the prior consent of the doctor: Pregnancy, diabetic complications (such as neuropathy or retinal injury), wearing a pacemaker, recent surgery, epilepsy or migraine, herniated disc, diastasis vertebrae, or spondylitis, recent joint replacement surgery or IUD, metal needle or steel plate.

Forbiddance

- It is forbidden for children under the age of 10 to use it. If you are injured, do not use this product. Please consult your doctor before using this product when your muscles are damaged.
- It is forbidden to use on the surface of non-dry, non-clean skin. You can use it across clothes, gently press and move on the skin, each part for about 60 seconds.
- It is forbidden to use when bruising, pain, or discomfort appears.
- It is forbidden to put any objects into the ventilation holes of the motor.
- It is forbidden to immerse the product in water.
- It is forbidden to disassemble this product in any way.
- Forbid fingers, hair, or other parts of the body near the axis and back of the massage head to prevent pinch and injury.

Product parts

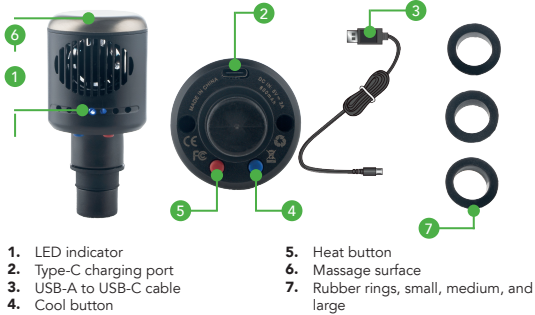

- LED indicator
- Type-C charging port
- USB-A to USB-C cable
- Cool button
- Heat button
- Massage surface
- Rubber rings, small, medium, and large

Instructions

The button is divided into two buttons: blue and red.

- Blue is the cool button and red is the hot button. Long press the red button for 2 seconds to enter the first level and press it again to enter the second level. Long press the blue button for 2 seconds to enter the first level and press it again to enter the second level.
- Long press one of the buttons for 2 seconds to shut down the device.
- When the power is low, the LED indicator will flash red and then switches off. The red light will flash when charging and will shine steadily blue when fully charged.
- The LED indicator will shine blue for Cool level 1 and will shine more bright for Cool level 2.
- The LED indicator will shine red for Heat level 1 and will shine more bright for Heat level 2.
- The device will automatically turn off after 15 minutes of usage for safety.
- The massage surface can be cleaned with a damp cloth, but make sure to switch off the product and don't use any detergents.

Compatibility

Please scan below QR code to see which massage guns are compatible with this massage head:



Disclaimer

© 2023 Tunturi New Fitness BV
All rights reserved. The product and the manual are subject to change. Specifications can be changed without further notice.

Tunturi New Fitness B.V. / P.O. Box 60001 / 1320 AA Almere
The Netherlands / www.tunturi.com



Hinweis:
Das Kopf für Massagepistole wird mit einem Lithium-Ionen-Akku geliefert, bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Akku vor der Verwendung mit dem mitgelieferten USB-A-zu-USB-C-Kabel aufladen.

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Massagekopf verwenden.

Produktspezifikationen

Batteriekapazität	800 mAh
Batterietyp	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, nicht austauschbar
Ladezeit	2,5 Stunden
Anwendbares Ladegerät	5V / 2A Ladegerät
Wärmeleistung	3,7W
Kaltleistung	4,5W
Produktgröße	9,1 x 4,5 x 4,5 cm 3,6 x 1,8 x 1,8 Zoll
Produktgewicht	120 g 0,26 lb
Höchsttemperatur (Hitze)	Stufe 1: 40°C Stufe 2: 45°C
Höchsttemperatur (Cool)	Stufe 1: 20°C Stufe 2: 15°C
Arbeitszeit (Wärme)	Stufe 1: 2,5 Stunden Stufe 2: 2 Stunden
Arbeitszeit (Cool)	Stufe 1: 1 Stunde Stufe 2: 40 Min.

Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch

Um das Risiko von Fehlfunktionen, Stromschlägen, Verletzungen, Feuer, Tod und Geräteschäden zu verringern, lesen Sie bitte alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

- Von Flüssigkeiten oder Wärmequellen fernhalten und die Lüftungsöffnungen staubfrei halten.
- Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie bitte das Netzkabel ab.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht während des Ladevorgangs.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt gemäß den Anweisungen.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch sorgfältig, ob das Produkt gemäß den Bedienungsmethoden dieses Handbuchs normal verwendet werden kann.


WARNUNG

Dieses Produkt darf in keiner der folgenden Situationen ohne vorherige Zustimmung des Arztes verwendet werden: Schwangerschaft, diabetische Komplikationen (wie Neuropathie oder Netzhautverletzung), Tragen eines Herzschrittmachers, kürzliche Operation, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfall, Wirbelstadiase oder Spondylitis, kürzliche Gelenkersatzoperation oder IUD, Metallnadel oder Stahlplatte.

Verbot

- Es ist Kindern unter 10 Jahren verboten, es zu benutzen. Wenn Sie verletzt sind, verwenden Sie dieses Produkt nicht. Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden, wenn Ihre Muskeln geschädigt sind.
- Es ist verboten, auf der Oberfläche nicht trockener, nicht sauberer Haut zu verwenden. Sie können es über der Kleidung verwenden, sanft drücken und auf der Haut bewegen, jedes Teil für etwa 60 Sek.
- Es ist verboten, es zu verwenden, wenn Blutergüsse, Schmerzen oder Beschwerden auftreten.
- Es ist verboten, Gegenstände in die Lüftungsöffnungen des Motors zu stecken.
- Es ist verboten, das Produkt in Wasser einzutauchen.
- Es ist verboten, dieses Produkt in irgendeiner Weise zu zerlegen.
- Verbieten Sie Finger, Haare oder andere Körperteile in der Nähe der Achse und der Rückseite des Massagekopfs, um Quetschungen und Verletzungen zu vermeiden.

Product parts

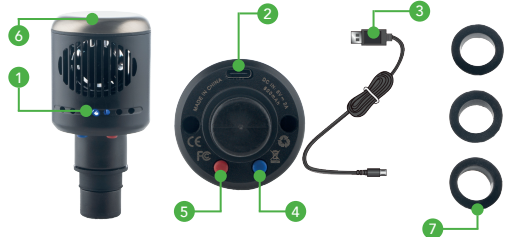

- LED-Anzeige
- Typ-C-Ladeanschluss
- USB-A-zu-USB-C-Kabel
- Cooler Knopf
- Heiztaste
- Massagefläche
- Gummipassringe, klein, mittel und groß

Anweisungen

Die Schaltfläche ist in zwei Schaltflächen unterteilt: blau und rot.

- Blau ist der Cool-Button und Rot ist der Hot-Button. Halten Sie die rote Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in die erste Ebene zu gelangen, und drücken Sie sie erneut, um in die zweite Ebene zu gelangen. Halten Sie die blaue Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in die erste Ebene zu gelangen, und drücken Sie sie erneut, um in die zweite Ebene zu gelangen.
- Halten Sie eine der Tasten 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- Wenn die Leistung niedrig ist, blinkt die LED-Anzeige rot und erlischt dann. Das rote Licht blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet dauerhaft blau, wenn es vollständig aufgeladen ist.
- Die LED-Anzeige leuchtet bei Kühlstufe 1 blau und bei Kühlstufe 2 heller.
- Die LED-Anzeige leuchtet bei Heizstufe 1 rot und bei Heizstufe 2 heller.
- Das Gerät schaltet sich aus Sicherheitsgründen nach 15 Minuten Gebrauch automatisch aus.
- Die Massagefläche kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, aber stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist und verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

Kompatibilität

Bitte scannen Sie den folgenden QR-Code, um zu sehen, welche Massagepistolen mit diesem Massagekopf kompatibel sind:



Disclaimer

© 2023 Tunturi New Fitness BV
Alle Rechte vorbehalten. Änderungen am Produkt und am Handbuch vorbehalten. Die Spezifikationen können ohne weitere Ankündigung geändert werden.

Tunturi New Fitness B.V. / P.O. Box 60001
1320 AA Almere / The Netherlands
www.tunturi.com





Remarque:

La tête pour pistolet de massage est livrée avec une batterie lithium-ion, veuillez vous assurer de charger la batterie avant utilisation avec le câble USB-A vers USB-C inclus.

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser la tête de massage.

Spécifications du produit

Capacité de la batterie	800 mAh
Type de batterie	Batterie lithium-ion rechargeable, non remplaçable
Temps de charge	2,5 heures
Chargeur applicable	Chargeur 5V / 2A
Puissance thermique	3,7W
Puissance à froid	4,5W
Taille du produit	9,1 x 4,5 x 4,5 cm 3,6 x 1,8 x 1,8 pouces
Poids du produit	120 g 0.26 lb
Température maximale (Chaleur)	Niveau 1: 40°C Niveau 2: 45°C
Température maximale (Froid)	Niveau 1: 20°C Niveau 2: 15°C
Temps de travail (Chaleur)	Niveau 1: 2,5 heures Niveau 2: 2 heures
Temps de travail (Froid)	Niveau 1: 1 heure Niveau 2: 40 min.

Précautions avant utilisation

Afin de réduire les risques de dysfonctionnement, d'électrocution, de blessure, d'incendie, de décès et de dommages matériels, veuillez lire attentivement toutes les instructions et tous les avertissements contenus dans ce manuel avant d'utiliser ce produit.

- Tenir à l'écart des liquides ou des sources de chaleur et garder les événements exempts de poussière.
- Une fois la charge terminée, veuillez débrancher le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas ce produit pendant le chargement.
- Veuillez utiliser ce produit conformément aux instructions.
- Avant chaque utilisation, vérifiez soigneusement si le produit peut être utilisé normalement selon les méthodes de fonctionnement de ce manuel.


AVERTISSEMENT

Ce produit ne peut être utilisé dans aucune des situations suivantes sans l'accord préalable du médecin : grossesse, complications diabétiques (telles que neuropathie ou lésion rétinienne), port d'un stimulateur cardiaque, intervention chirurgicale récente, épilepsie ou migraine, hernie discale, vertèbre diastase ou spondylarthrite, arthroplastie récente ou stérilet, aiguille métallique ou plaque d'acier.

Interdiction

- Il est interdit aux enfants de moins de 10 ans de l'utiliser. Si vous êtes blessé, n'utilisez pas ce produit. Veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit lorsque vos muscles sont endommagés.
- Il est interdit d'utiliser sur la surface d'une peau non sèche et non propre. Vous pouvez l'utiliser sur les vêtements, appuyer doucement et déplacer sur la peau, chaque partie pendant environ 60 secondes.
- Il est interdit d'utiliser lorsque des ecchymoses, des douleurs ou des maux apparaissent.
- Il est interdit de mettre des objets dans les trous de ventilation du moteur.
- Il est interdit d'immerger le produit dans l'eau.
- Il est interdit de démonter ce produit de quelque manière que ce soit.
- Interdisez les doigts, les cheveux ou d'autres parties du corps près de l'axe et de l'arrière de la tête de massage pour éviter les pincements et les blessures.

Pièces du produit

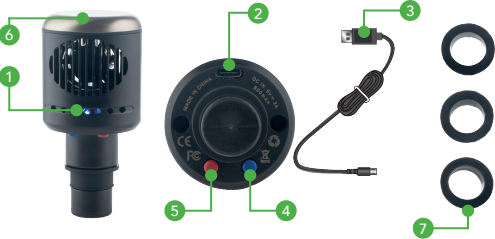

1. Indicateur LED
2. Port de charge de type C
3. Câble USB-A vers USB-C
4. Bouton frais
5. Bouton de chauffage
6. Surface de massage
7. Anneaux de raccord en caoutchouc, petits, moyens et grands

Instructions

- Le bouton est divisé en deux boutons : bleu et rouge.
- Le bleu est le bouton cool et le rouge est le bouton chaud. Appuyez longuement sur le bouton rouge pendant 2 secondes pour entrer dans le premier niveau et appuyez à nouveau pour entrer dans le deuxième niveau. Appuyez longuement sur le bouton bleu pendant 2 secondes pour entrer dans le premier niveau et appuyez à nouveau pour entrer dans le deuxième niveau.
 - Appuyez longuement sur l'un des boutons pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.
 - Lorsque la puissance est faible, le voyant LED clignote en rouge puis s'éteint. Le voyant rouge clignote lors de la charge et s'allume en bleu fixe lorsqu'il est complètement chargé.
 - L'indicateur LED brillera en bleu pour le niveau Cool 1 et brillera plus fort pour le niveau Cool 2.
 - L'indicateur LED brillera en rouge pour le niveau de chaleur 1 et brillera plus fort pour le niveau de chaleur 2.
 - L'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes d'utilisation pour des raisons de sécurité.
 - La surface de massage peut être nettoyée avec un chiffon humide, mais assurez-vous d'éteindre le produit et de ne pas utiliser de détergents.

Compatibilité

Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour voir quels pistolets de massage sont compatibles avec cette tête de massage.



Disclaimer

© 2023 Tunturi New Fitness BV
Tous droits réservés. Le produit et le manuel sont susceptibles d'être modifiés. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Tunturi New Fitness B.V. / P.O. Box 60001
1320 AA Almere / The Netherlands
www.tunturi.com



Opmerking:

De kop voor massage gun wordt geleverd met een lithium-ionbatterij. Zorg ervoor dat u de batterij voor gebruik oplaadt met de meegeleverde USB-A naar USB-C-kabel.

Lees de instructies aandachtig door voordat u de massagekop gebruikt.

Productspecificaties

Batterijcapaciteit	800 mAh
Batterijtype	Oplaadbare lithium-ionbatterij, niet vervangbaar
Oplaatdij	2,5 uur
Toepasselijke lader	5V / 2A lader
Warmtevermogen	3,7W
Koud vermogen	4,5W
Productafmetingen	9,1 x 4,5 x 4,5 cm 3,6 x 1,8 x 1,8 inch
Productgewicht	120 g 0.26 lb
Maximale temperatuur (Warmte)	Niveau 1: 40°C Niveau 2: 45°C
Maximale temperatuur (Koelen)	Niveau 1: 20°C Niveau 2: 15°C
Werkijd (Warmte)	Niveau 1: 2,5 uur Niveau 2: 2 uur
Werkijd (Koelen)	Niveau 1: 1 uur Niveau 2: 40 minuten

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Om het risico op defecten, elektrische schokken, letsel, brand, overlijden en schade aan apparatuur te verkleinen, dient u alle instructies en waarschuwingen in deze handleiding aandachtig te lezen voordat u dit product gebruikt.

- Blijf uit de buurt van vloeistoffen of warmtebronnen en houd de ventilatieopeningen stofvrij.
- Haal de stekker uit het stopcontact nadat het opladen is voltooid.
- Gebruik dit product niet tijdens het opladen.
- Gebruik dit product volgens de instructies.
- Controleer voor elk gebruik zorgvuldig of het product normaal kan worden gebruikt volgens de bedieningsmethoden van deze handleiding.

WAARSCHUWING

Dit product mag niet worden gebruikt in een van de volgende situaties zonder voorafgaande toestemming van de arts: Zwangerschap, diabetische complicaties (zoals neuropathie of netvliesletsel), het dragen van een pacemaker, recente operatie, epilepsie of migraine, hernia, diastase wervel of spondylitis, recente gewrichtsvervangende operatie of IUD, metalen naald of stalen plaat.

Verbod

- Het is verboden voor kinderen onder de 10 jaar om het te gebruiken. Gebruik dit product niet als u gewond bent. Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt wanneer uw spieren beschadigd zijn.
- Het is verboden om te gebruiken op het oppervlak van een niet-droge, niet-schone huid. Je kunt het over kleding heen gebruiken, zachtjes op de huid drukken en bewegen, elk deel ongeveer 60 seconden.
- Het is verboden te gebruiken wanneer blauwe plekken, pijn of ongemak optreden.
- Het is verboden om voorwerpen in de ventilatieopeningen van de motor te steken.
- Het is verboden het product in water onder te dompelen.
- Het is verboden dit product op welke manier dan ook te demonteren.
- Verbied vingers, haar of andere lichaamsdelen in de buurt van de as en achterkant van de massagekop om beknelling en letsel te voorkomen.

Productonderdelen



1. LED-indicator
2. Type-C oplaadpoort
3. USB-A naar USB-C-Kabel
4. Koel knop
5. Verwarmingsknop
6. Massage oppervlak
7. Rubberen pasringen, klein, medium en groot

Instructies

- De knop is verdeeld in twee knoppen: blauw en rood.
- Blauw is de cool-knop en rood is de hot-knop. Druk 2 seconden lang op de rode knop om naar het eerste niveau te gaan en druk er nogmaals op om naar het tweede niveau te gaan. Druk 2 seconden lang op de blauwe knop om naar het eerste niveau te gaan en druk er nogmaals op om naar het tweede niveau te gaan.
 - Druk 2 seconden lang op een van de knoppen om het apparaat uit te schakelen.
 - Wanneer de stroom bijna leeg is, knipt de LED-indicator rood en gaat dan uit. Het rode lampje knippert tijdens het opladen en brandt gestaag blauw als het volledig is opgeladen.
 - De LED-indicator zal blauw oplichten voor Koelniveau 1 en zal feller schijnen voor Koelniveau 2.
 - De LED-indicator zal rood oplichten voor warmteniveau 1 en zal feller schijnen voor warmteniveau 2.
 - Om veiligheidsredenen schakelt het apparaat na 15 minuten gebruik automatisch uit.
 - Het massageoppervlak kan met een vochtige doek worden schoongemaakt, maar zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld en gebruik geen

Compatibiliteit

Scan onderstaande QR-code om te zien welke massagepistolen compatibel zijn met deze massagekop:



Disclaimer

© 2023 Tunturi New Fitness BV
Alle rechten voorbehouden. Het product en de handleiding zijn aan wijzigingen onderhevig. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Tunturi New Fitness B.V. / P.O. Box 60001
1320 AA Almere / The Netherlands
www.tunturi.com

