



REINIGING EN DESINFECTEREN VAN INSTRUMENTATIE

Aniosyme XL3

XL ENZYMATISCHE DESINFECTERENDE REINIGINGSKRACHT VOOR GEAVANCEERDE HANDMATIGE HERVERWERKING

Aniosyme XL3 is het neutrale enzymatische desinfectiemiddel voor handmatige herverwerking van instrumentatie. Met een krachtige reiniging levert de speciaal ontwikkelde tri-enzymatische formule uitstekende materiaalcompatibiliteit bij de laagste concentraties voor de kortst mogelijke contacttijden.

- **UNIEK** - Gepatenteerde formule
- **STERK** - Zeer hoge reinigingskracht
- **SNEL** - Geoptimaliseerde antimicrobiële werking vanaf 5 minuten
- **GEBALANCEERD** - Niet corrosief op materialen



Aniosyme XL3


XL enzymatische desinfecterende reinigingskracht voor geavanceerde handmatige reiniging

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- Helder oranje oplossing
- Dichtheid 20°C 1,18g/ml
- pH-waarde* (geconcentreerde stof) 20°C: 7,84
- pH verdund tot 0,5%: 8,06
- pH verdund tot 1%: 7,96
- Geleidbaarheid bij 0,5%, 1% en 2%: 0,72 - 1,30 - 2,33 mS/cm

*pH-waarde gemeten onder werkomstandigheden altijd met behulp van een pH-meter met temperatuurcompensatie.


GEBRUIKSAANWIJZINGEN

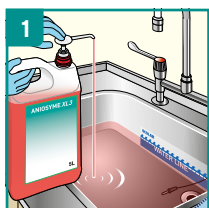


Geconcentreerde oplossing voor professioneel gebruik. Gebruik om materiaal te weken in benodigde oplossing, met inachtneming van de contacttijd.

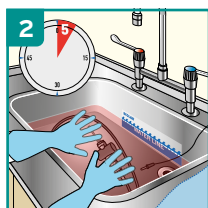

Dompel de medische apparatuur volledig onder. Bedek de wasbak. Borstel zichtbare verontreiniging weg, indien aanwezig.

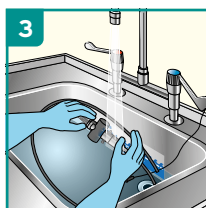

Spoel behandelde medische apparatuur grondig met leidingwater om alle sporen van het product en organische verontreiniging te verwijderen.

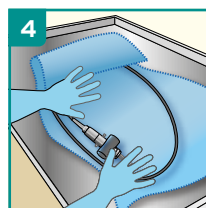

Ververs de oplossing zodra deze zichtbaar verontreinigd is en minstens een keer per dag om de effectiviteit van het product op peil te houden. Laat de meegeleverde pomp aanzuigen voor eerste gebruik.

DOSEERSHEMA

LITER OPLOSSING	CONCENTRATIE VAN DE TOEPASSINGSOPLOSSING	
	0.5%	1%
1 liter	5 ml	10 ml
2 liter	10 ml	20 ml
4 liter	20 ml	40 ml
8 liter	40 ml	80 ml

MICROBIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

BEWERING/OMSTANDIGHEDEN	CONCENTRATIE	CONTACTTIJD
Desinfectie van Instrumentatie - Volgens VAH (bacterie- en gistdodend), vuile omstandigheden	0.5%	15 min
Bacteriedodend - Volgens EN 13727 en EN 14561, vuile omstandigheden	0.5%	5 min
Gistdodend - Volgens EN 13624 en EN 14562, vuile omstandigheden	0.5%	5 min
Tuberculocide activiteit - Volgens EN 14348 en EN 14563, vuile omstandigheden	1.0%	30 min
Effectief tegen omhulde virussen - Volgens EN 14476 en EN 17111, vuile omstandigheden	0.5%	15 min

VERPAKKING EN BESTELINFORMATIE

PRODUCT	VERPAKKINGSEENHEID	BESTELCODE
Aniosyme XL3	12 x 1 L flessen	2381.095
Aniosyme XL3	4 x 5 liter bussen	2381.036



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Gedistribueerd door:
LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

LABORATOIRES ANIOS
An Ecolab Company

www.anios.com

TOEPASSINGSGBIED

Reiniging en desinfectie van medische apparatuur: chirurgische en medische instrumentatie, warmtegevoelige instrumentatie en endoscopische uitrusting, voor sterilisatie.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Geconcentreerde oplossing voor professioneel gebruik. Gebruik om materiaal te weken in benodigde oplossing, met inachtneming van de contacttijd.

Dompel de medische apparatuur volledig onder. Bedek de wasbak. Borstel zichtbare verontreiniging weg, indien aanwezig. Spoel behandelde medische apparatuur grondig met leidingwater om alle sporen van het product en organische verontreiniging te verwijderen.

Ververs de oplossing zodra deze zichtbaar verontreinigd is en minstens een keer per dag om de effectiviteit van het product op peil te houden. Laat de meegeleverde pomp aanzuigen voor eerste gebruik.

INGREDIËNTEN

Quaternair ammoniumcarbonaat, niet-ionische tensio-actieve stoffen, enzymcomplexen (protease, amylase en mannanase), bindmiddel, geurstof, kleurstof, hulpstoffen.

OPSLAG

Gevaarlijk. Leef de voorzorgsmaatregelen na (opgesteld volgens de van kracht zijnde Europese regels met betrekking tot de classificatie en etikettering van chemicaliën). Opslag: tussen +5 °C en +25 °C.

CERTIFICATEN

Medisch hulpmiddel. Volledige antimicrobiële activiteit van Aniosyme XL3 wordt weergegeven in het wetenschappelijk dossier, beschikbaar op aanvraag.

MEDISCH HULPMIDDEL GEBRUIK VEILIG

Lees het etiket en de productinformatie.



ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.