

Radarmed 650+ en 950+

Apparaat voor
microgolftherapie





Radarmed 650+ en 950+

De Radarmed 650+ en 950+ zijn apparaten voor continue en pulserende microgolftherapie met een frequentie van 2450 MHz (12 cm golven). De veilige doseringsmogelijkheid op basis van het warmtegevoel van de patiënt is een groot voordeel van microgolftherapie. Microgolftherapie is eenvoudig toe te passen dankzij de unipolaire applicatie. De elektrode maakt geen contact met de patiënt en is daardoor eenvoudig, veilig en hygienisch toe te passen.

- Continue en gepulseerde afgifte (max 250 Watt continu, max 1500 Watt gepulseerd)
- Gemakkelijk overschakelen tussen continue en gepulseerde therapie
- Op het verlichte display staan de parameters overzichtelijk gerangschikt
- De parameterinstellingen blijven tijdens de behandeling zichtbaar op het display
- Geheugen voor behandelprotocollen (alleen bij de Radarmed 950+)

Radarmed 650+ en 950+

1435901 Radarmed 650+

Apparaat voor continue en gepulseerde microgolfterapie. Dosis en behandelijd worden digitaal weergegeven op het scherm (LED-display) en zijn eenvoudig met de druktoetsen in te stellen

1435921 Radarmed 950+

Als de Radarmed 650+, maar met LCD-scherm. Gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit staan centraal bij de Radarmed 950+. Met behulp van de centrale regelaar en de drukknoppen kunnen de parameters eenvoudig en snel worden ingesteld. Tevens kunnen behandelprotocollen worden opgeslagen.

Standaard accessoires

- | | |
|---------------------------|---|
| 1435750/51 ⁽¹⁾ | Bedieningshandleiding Radarmed 650+ / 950+ ⁽¹⁾ |
| 1462560 | Elektrodearm Radarmed |
| 1409813 | HF-kabel 250 Watt voor de Radarmed |
| 3444298 | Netsnoer 230V-EUR |

(1) = model afhankelijk

BESTELGEGEVENS



650+




950+

Radarmed 650+ en 950+

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie	2450 MHz +/- 50 MHz
HF continu vermogen	0 - 250 Watt +/- 20% bij 50 Ohm
HF puls vermogen	0 - 250 Watt +/- 20% met een vast piekvermogen van 1500 Watt
Therapievormen	continu en pulserend
Klok	0 - 30 minuten
Netspanning	220-240 Volt
Frequentie	50 / 60 Hz
Opgenomen vermogen	1100 VA
Veiligheidsklasse	1 type B
Gewicht	45 kg (inclusief arm)
Afmeting	93x39x49 cm (hxbxd inclusief wielen)

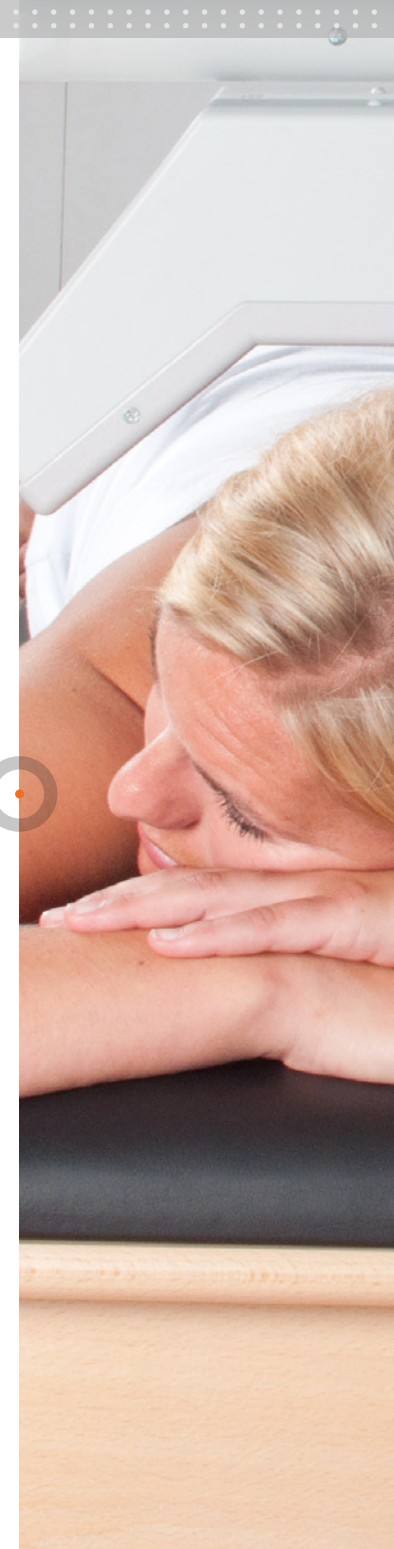

Radarmed 650+ en 950+

ACCESSOIRES

Optionele accessoires

- 1409810 Grootveldstraler voor Radarmed
- 1409811 Langveldstraler voor Radarmed
- 1409812 Rondveldstraler Ø 17 cm voor Radarmed
- 3441306 Controlebuisje neon
- 1480803 Potentiaalvereffeningsaardpen + kabel 5 m
- 3442022 Beschermbril microgolftherapie



1409810



1409811



1409812



3441306



1480803



3442022



Radarmed 650+ en 950+

ACCESSOIRES

Meubilair voor korte- en microgolf

Speciaal voor behandeling met kortegolf en microgolf apparatuur bieden wij diverse meubels aan, zoals een stoel en behandelbank. Met deze meubels ontstaan er geen plekken met warmteconcentratie.

3441401 Bank, blank gelakt hout, 190x60x75 cm

3441337 Behandelstoel, blank gelakt hout

3441338 Voetenbankje, blank gelakt hout





Radarmed 650+ en 950+



Apparaat voor
microgolftherapie

Enraf-Nonius B.V. | Vareseweg 127 | 3047 AT Rotterdam | Nederland
www.enraf-nonius.com | info@enraf-nonius.nl | + 31 - (0) 10 20 30 600



PARTNER FOR LIFE