



Manumed Tractie

Tractietherapie en behandeling
met één en dezelfde bank

Manumed Tractie

Voor het toepassen van lumbale en cervicale tractietherapie bestaat er de Manumed Tractiebank. Het verrolbare ligvlak voorkomt wrijving onder heup en benen, waardoor tijdens de behandeling van de rug deze ook daadwerkelijk met de ingestelde tractiekracht wordt belast. De Manumed Tractie is in twee varianten verkrijg-

baar, als bank met een vaste werkhoogte of als bank die in hoogte verstelbaar is. De in hoogte verstelbare tractiebank is tevens een ideale behandelbank omdat de verrolbare bladdelen zijn vast te zetten.



Manumed Tractie

- Meerrollende bladdelen (ook vast te zetten)
- Voorzien van bevestigingsmogelijkheden voor het tractieframe
- Fixatierails voor fixatiebanden standaard
- Naast tractiebank ook als gewone behandelbank te gebruiken





Manumed Tractie hoogte verstelbaar

BESTELGEGEVENS

Type

- 916 Manumed Tractie, hydraulisch H/L
- 926 Manumed Tractie, elektrisch H/L

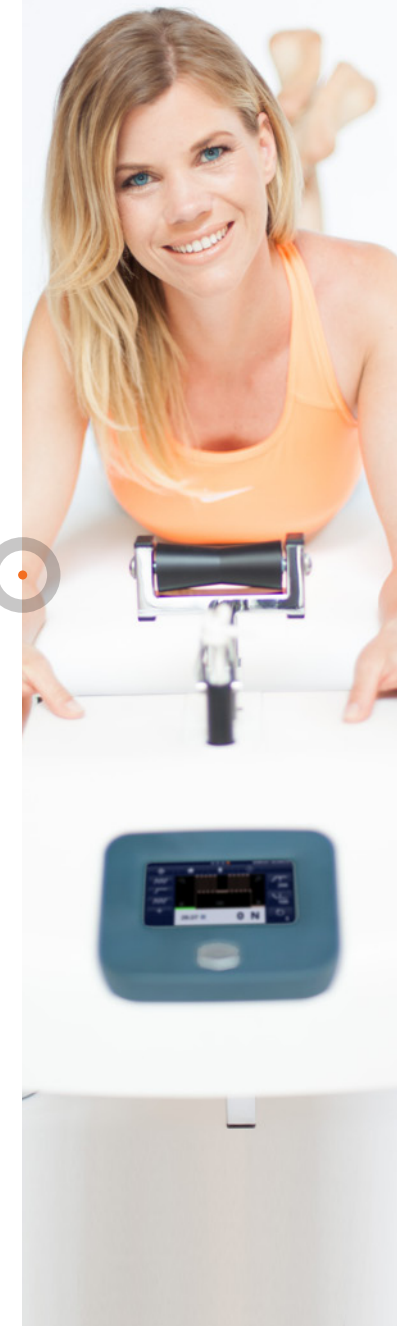
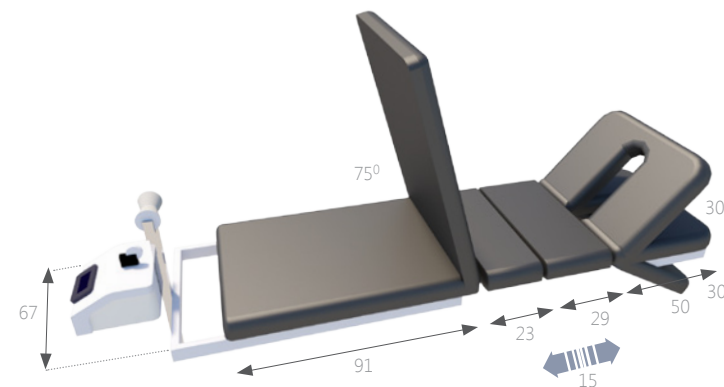


Manumed Tractie vaste hoogte

BESTELGEGEVENS

Type

004 Manumed Tractie, vaste hoogte

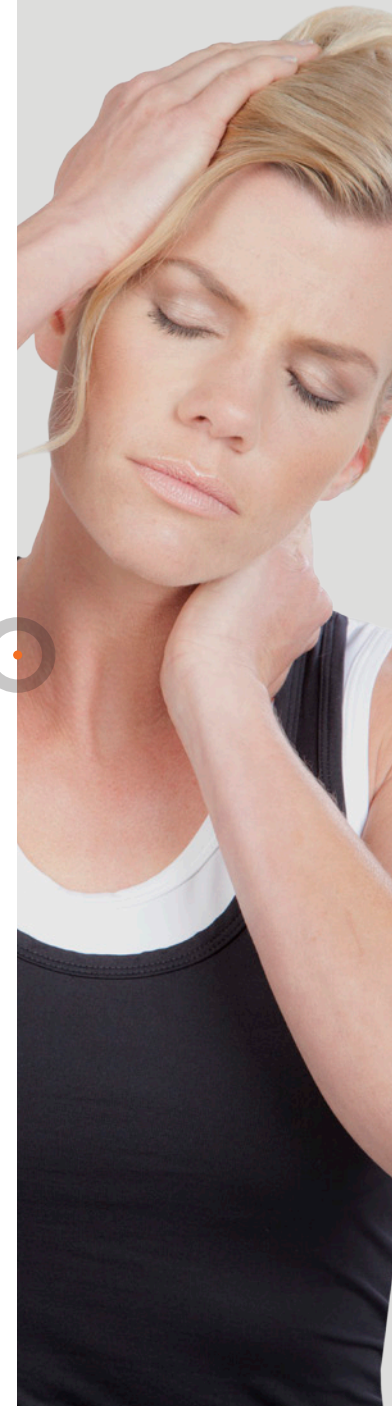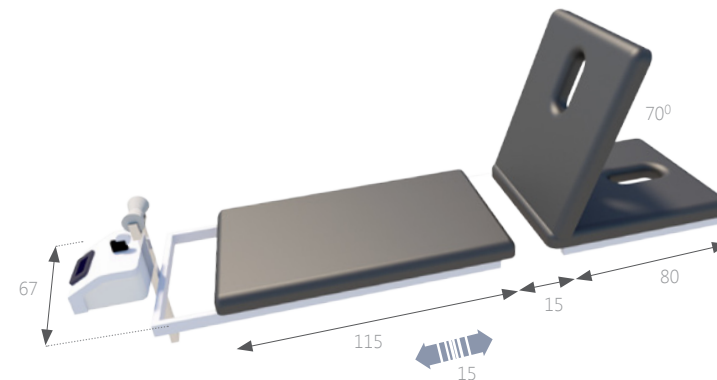

Manumed Tractie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model 916 en 926

| | |
|--|--|
| Afmetingen (lxb): | 203 x 67 cm |
| Hoogteverstelling: | 45-95 cm |
| Tijdsduur hoogteverstelling (min.-max.): | ongeveer 18 sec. |
| Hefvermogen: | 200 kg (met elektrische motor optioneel 250 kg) |
| Netspanning: | 120/230VAC 50/60 Hz |
| Opgenomen stroom: | 2.0 A max. |

Model 004

| | |
|-------------------|-------------|
| Afmetingen (lxb): | 195 x 67 cm |
| Hoogte: | 83 cm |
| Hefvermogen: | 150 kg |

Dit is een medisch hulpmiddel




Het voldoet aan alle toepasselijke medische voorschriften. Raadpleeg voor meer details de gebruiksaanwijzing (te downloaden via www.enraf-nonius.com).




Manumed kleuren

OPTIES⁽¹⁾

Voor ieder interieur een eigen Enraf-Nonius bank. Ook in fysiotherapiepraktijken is een goede uitstraling belangrijk. Patiënten moeten zich op hun gemak voelen in de ruimte waar zij behandeld worden. Omdat iedere praktijk anders ingericht is en een eigen kleur heeft, vinden wij het belangrijk dat ook de behandelbank binnen uw concept en sfeer past. Vandaar dat wij de behandelbanken kunnen produceren in meerdere frame- en skai-kleuren. Onze skai-bekleding is ftalatenvrij, vlamvertragend en biocompatibel; een unieke combinatie die deze skai geschikt maakt voor medisch gebruik!

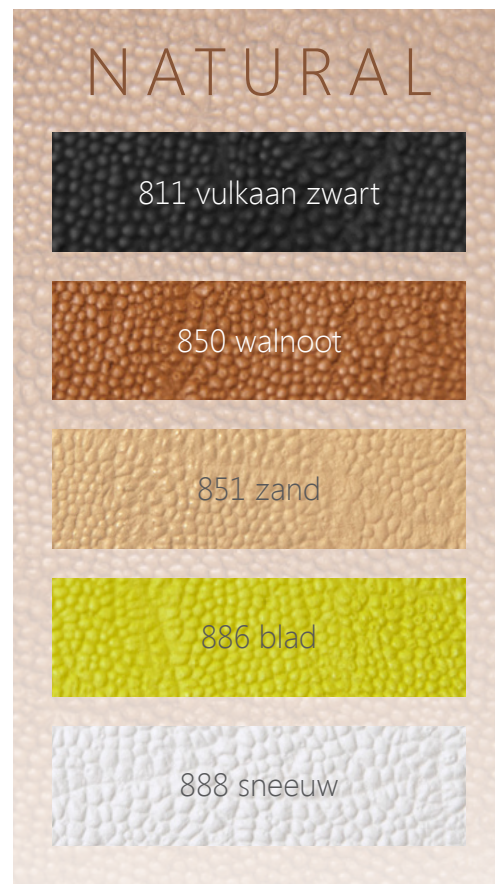


(1) = LET OP! Opties moeten tegelijk met de bank besteld worden i.v.m. aanpassingen aan het bladdeel tijdens productie.

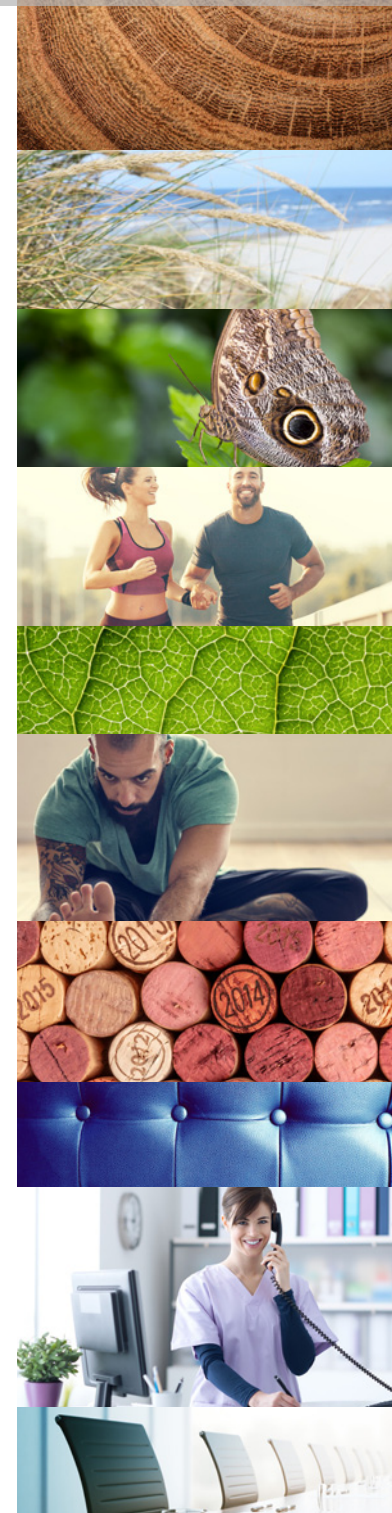


Manumed kleuren

NATURAL

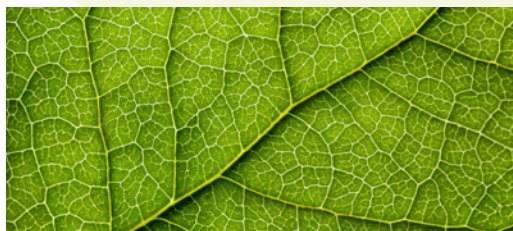

811 vulkaan zwart

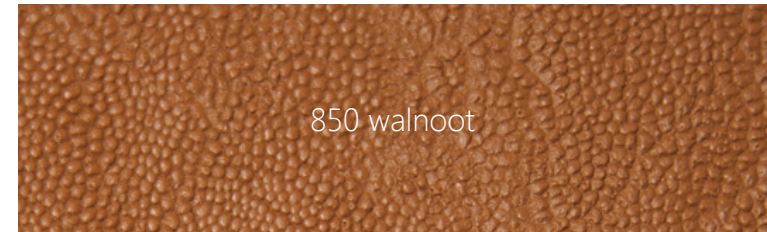

850 walnoot



851 zand




886 blad




888 sneeuw

Manumed kleuren


LIFESTYLE

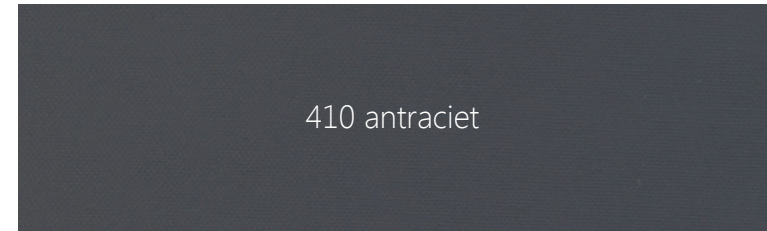

410 antraciet

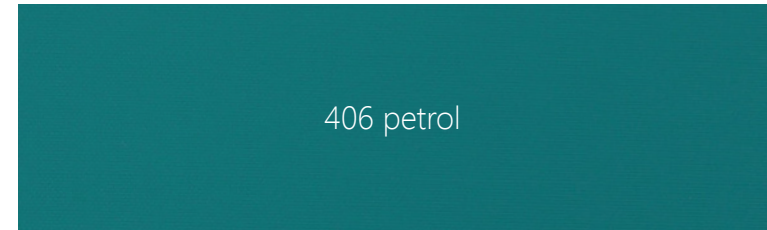


406 petrol

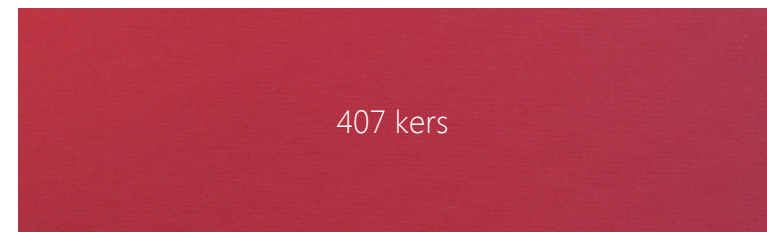

407 kers



408 terracotta

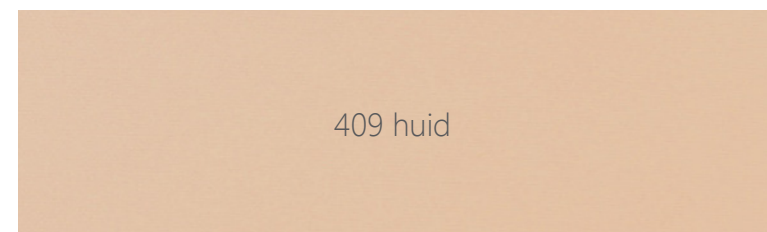

409 huid

Manumed kleuren

EXECUTIVE




012 zwart




213 grijs




199 lavendel

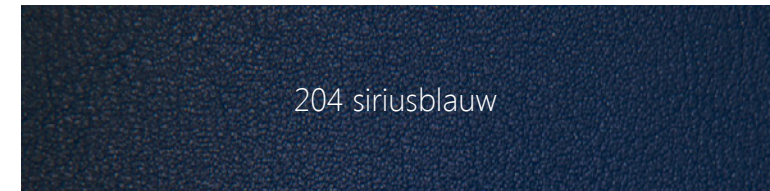

204 siriusblauw

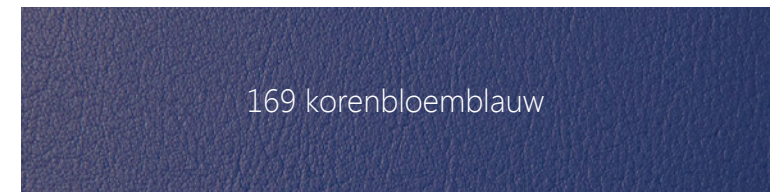

169 korenbloemblauw

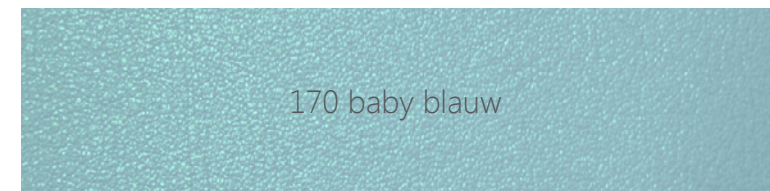

170 baby blauw

Manumed Tractie

OPTIES⁽¹⁾


Bekledingsvarianten

| Bladbreedte | Standaard 4 cm dik | Rechthoekig beendeel |
|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 67 cm | s | s |

s = standaard



Dichtheid schuim:

Standaard: 38 Kg/m³

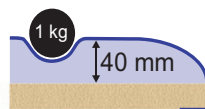

Neusgat

- A. Lang neusgat - inclusief kussen (standaard)
- B. Driehoekig neusgat (optie) exclusief kussen (1550813, apart te bestellen) *
- C. Geen neusgat

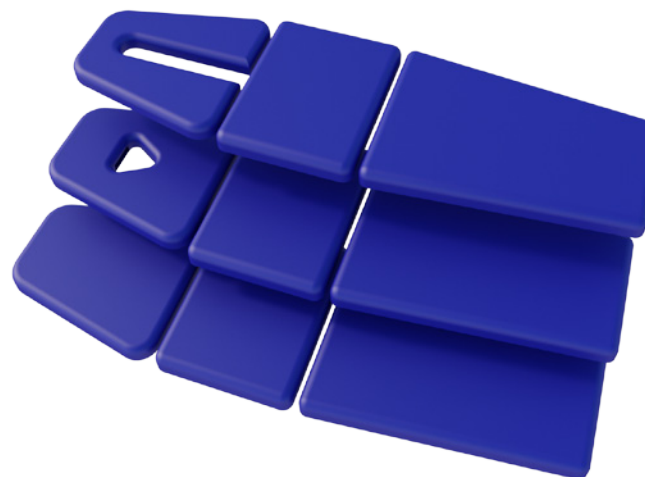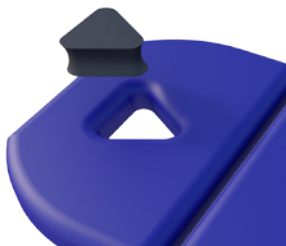

* In Nederland ontvangt u bij bestelling van een driehoekig neusgat, het kussen 1550813 gratis meegeleverd.
(1) = LET OP! Opties moeten tegelijk met de bank besteld worden i.v.m. aanpassingen aan het bladdeel tijdens productie



Manumed Tractie

OPTIES⁽¹⁾

Hoogteverstelling

- A. Hydraulisch (916) voetschakelaar (standaard)
- B. Elektrisch (926) voetschakelaar (standaard)
- C. Elektrisch (926) rondombediening (optioneel)



A



B



C

Hefvermogen

- A. Hydraulisch - max. 200 kg
- B. Elektrisch - max 200 kg
- C. Elektrisch - max 250 kg



A



B



C

(1) = LET OP! Opties moeten tegelijk met de bank besteld worden i.v.m. aanpassingen aan het bladdeel tijdens productie

Manumed Tractie

ACCESSOIRES

Papierrolhouders en papierrollen

- 3445280 Papierrolhouder vrijstaand voor 50 & 60 cm rol
- 3445278 Papierrollen 50 cm x 150 m, verpakt per 5 stuks
- 3445279 Papierrollen 60 cm x 150 m, verpakt per 5 stuks



3445280




3445278 / 3445279

Ophoogset

- 3450067 Ophoogset, 30 mm, maakt bank toegankelijk voor o.a. patiëntenliften



3450067

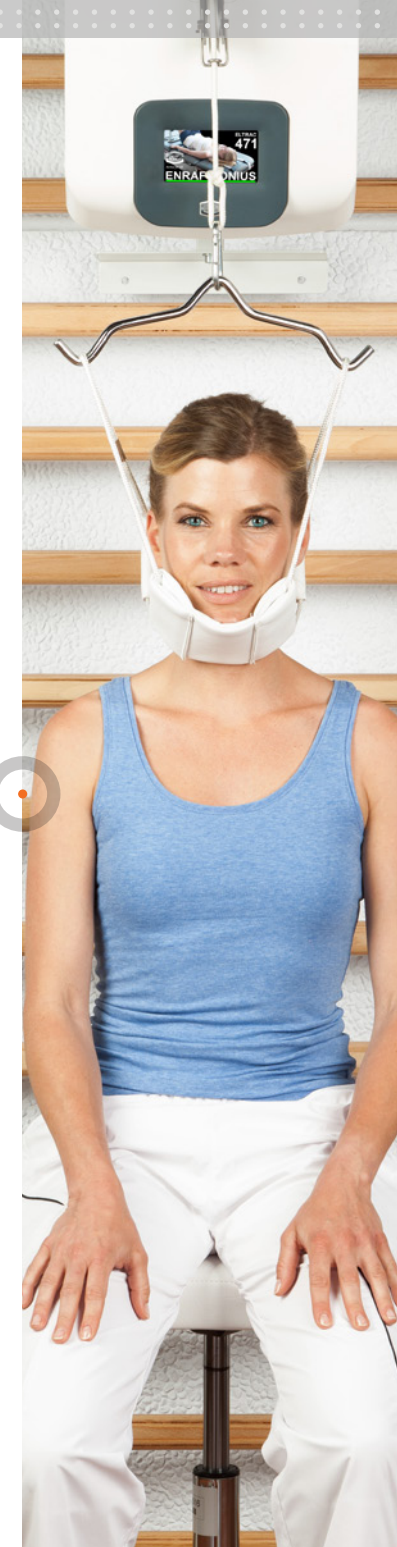

Manumed Tractie

ACCESSOIRES

- 3xxx014 Flexibank grijs, per been in hoogte instelbaar beschikbaar in diverse kleuren
- 3447624 Glissonlis, gepolsterd, compleet met ophangbeugel
- 1471802 Katrol voor verrijdbaar tractieframe (2 stuks benodigd)
- 3445022 Tractiegordel heup voor de Manumed Tractie
- 3445021 Tractiegordel borst voor de Manumed Tractie



3xxx014



3447624




1471802



3445022



3445021

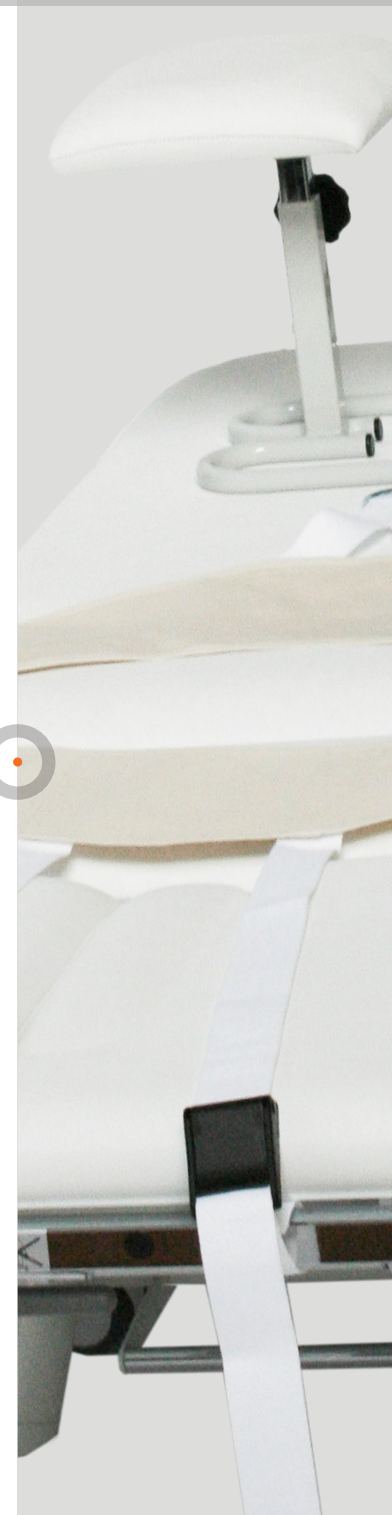

Manumed Tractie

- 3445512 Mobiel tractieframe voor cervicale tractie ⁽¹⁾
- 1471805 Wandrekbevestiging voor de Eltrac 471
- 3445038 Tractieframe voor de Manumed Tractie H/L (breedte 430 mm)
- 3445020 Tractieframe voor de Manumed (type 004) vaste hoogte (breedte 480 mm)⁽¹⁾

ACCESSOIRES




3445512




1471805



3445038

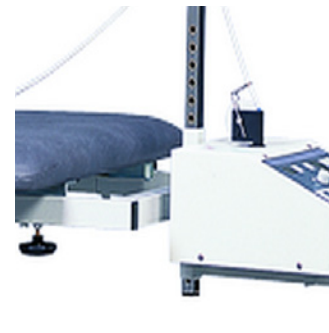

3445020

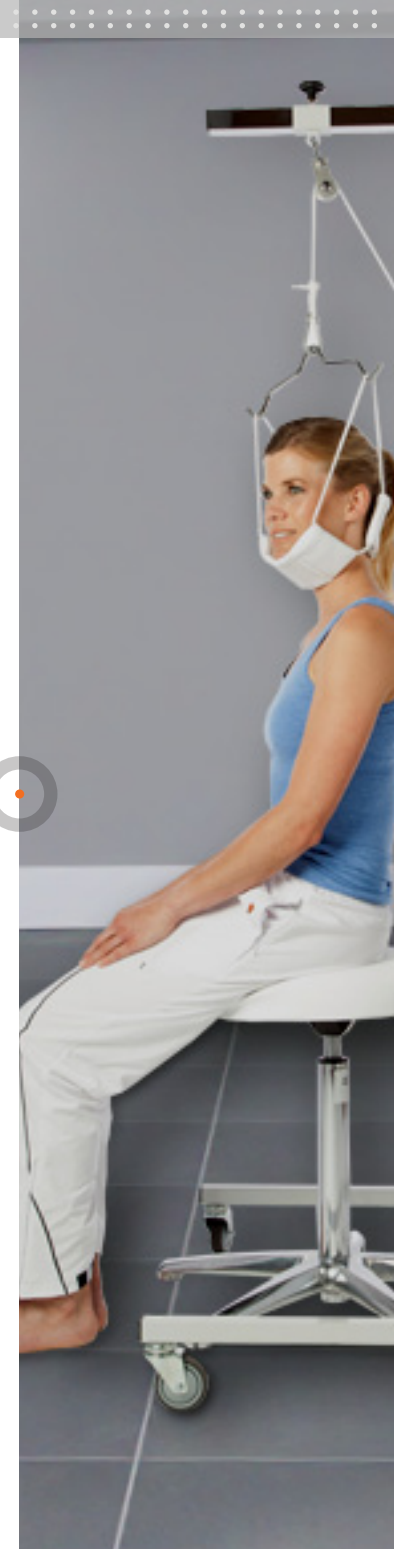

(1) = alleen voor de Manumed type 004 (Manumed Tractie vaste hoogte), 001 en 002 (Manumed Basis)

Manumed Tractie

ACCESSOIRES

Fixatiegordels

- 3445006 Beugel voor de fixatiegordel (2 st. nodig)
- 3445023 Fixatiegordel met klittenbandsluiting 120 cm
- 3445014 Fixatiegordel met klittenbandsluiting 160 cm
- 3445015 Fixatiegordel met klittenbandsluiting 240 cm
- 3445475 Fixatiegordel met veiligheidssluiting 250 cm
- 3445474 Fixatiegordel met veiligheidssluiting 350 cm



3445006



3445023



3445014 / 3445015



3445474 / 3445475



Taboeretten

ACCESSOIRES

- 3xxx010 Taboeret, hoogte instelbaar van 40-53 cm
- 3xxx011 Taboeret, met zwenkwielen en hoogte instelbaar van 59-85 cm
- 3xxx012 Taboeret, met wielen, voetensteun en hoogte instelbaar van 59-85 cm
- 3xxx013 Volgkruk, met zwenkwielen en hoogte instelbaar van 43-56 cm
- 3xxx020 Taboeret, zadelzit, met zwenkwielen en hoogte instelbaar van 59-85 cm



3xxx010



3xxx011



3xxx012




3xxx013



3xxx020


In onderstaande kleuren leverbaar

| NATURAL | LIFESTYLE | EXECUTIVE |
|--|---|--|
| <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: #1a1a1a; color: white; padding: 5px; text-align: center;">811</div> <div style="background-color: #c08040; color: white; padding: 5px; text-align: center;">851</div> </div> | <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; text-align: center;">410</div> <div style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 5px; text-align: center;">408</div> </div> | <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: #1a1a1a; color: white; padding: 5px; text-align: center;">012</div> <div style="background-color: #555; color: white; padding: 5px; text-align: center;">213</div> <div style="background-color: #ccc; color: white; padding: 5px; text-align: center;">199</div> <div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; text-align: center;">204</div> <div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; text-align: center;">169</div> <div style="background-color: #009999; color: white; padding: 5px; text-align: center;">170</div> </div> |

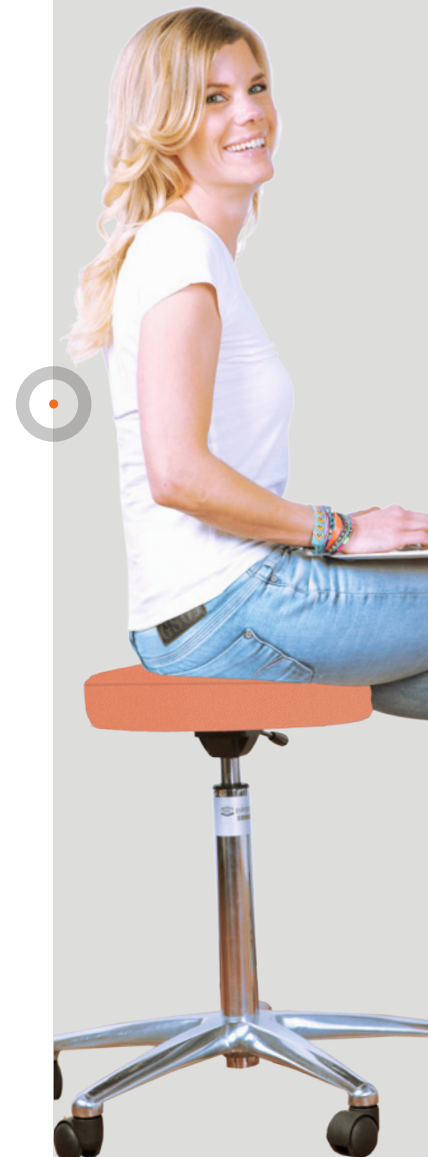

Kussens

| | | |
|---------|--|-------------|
| 3xxx002 | Halfrol, met platte onderkant, klein, speciaal voor de enkel | 28x9x11 cm |
| 3xxx003 | Halfrol, met platte onderkant, groot | 56x16x18 cm |
| 3xxx023 | Massagerol | 50x Ø15 cm |
| 3xxx004 | Nekrol, zandloper model | 30x15 cm |
| 3xxx005 | Massagekussen | 30x28x8 cm |
| 3xxx015 | Wigkussen | 50x30x15 cm |

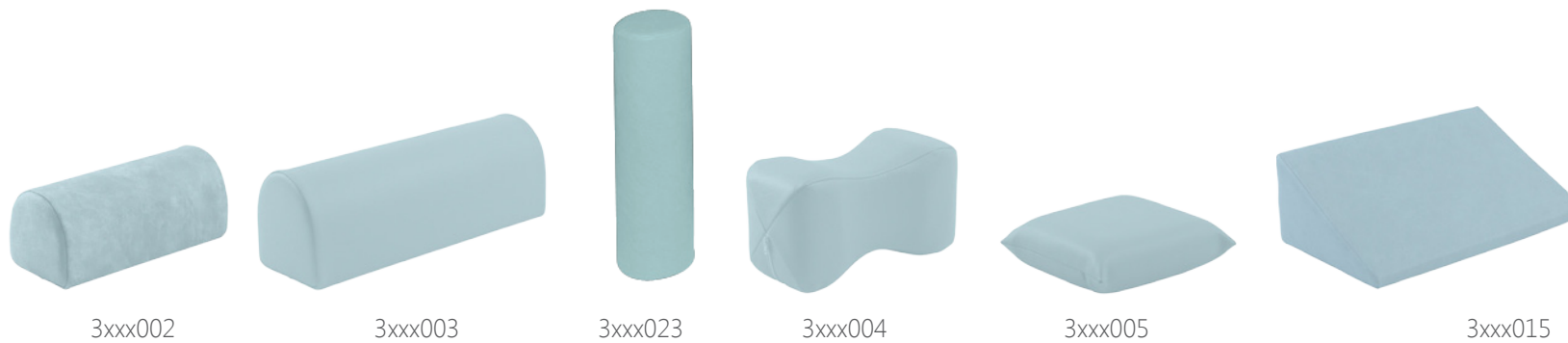

In onderstaande kleuren leverbaar

| NATURAL | LIFESTYLE | EXECUTIVE |
|--|--|--|
| <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: #1a1a1a; color: white; padding: 5px; text-align: center;">811</div> <div style="background-color: #c08040; color: white; padding: 5px; text-align: center;">851</div> </div> | <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: #202020; color: white; padding: 5px; text-align: center;">410</div> <div style="background-color: #e04040; color: white; padding: 5px; text-align: center;">408</div> </div> | <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: #101010; color: white; padding: 5px; text-align: center;">012</div> <div style="background-color: #505050; color: white; padding: 5px; text-align: center;">213</div> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; text-align: center;">199</div> <div style="background-color: #102040; color: white; padding: 5px; text-align: center;">204</div> <div style="background-color: #203060; color: white; padding: 5px; text-align: center;">169</div> <div style="background-color: #408080; color: white; padding: 5px; text-align: center;">170</div> </div> |

ACCESSOIRES




Kussens

ACCESSOIRES

1550813 Neusplug driehoekig ⁽¹⁾ 16,5 x 21 cm

3445297 Wig volgens Kaltenborn, rubber ⁽¹⁾ 22,5 x 10,5 x 8,5

3446161 Zandkussen 1,2 kg ⁽²⁾ 15x25 cm

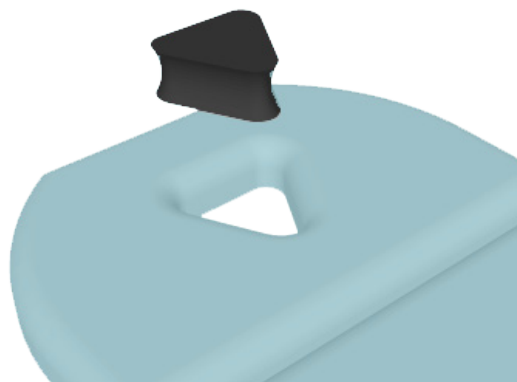

1550813


(1) = alleen in zwart verkrijgbaar
(2) = alleen in grijs leverbaar



3445297




3446161

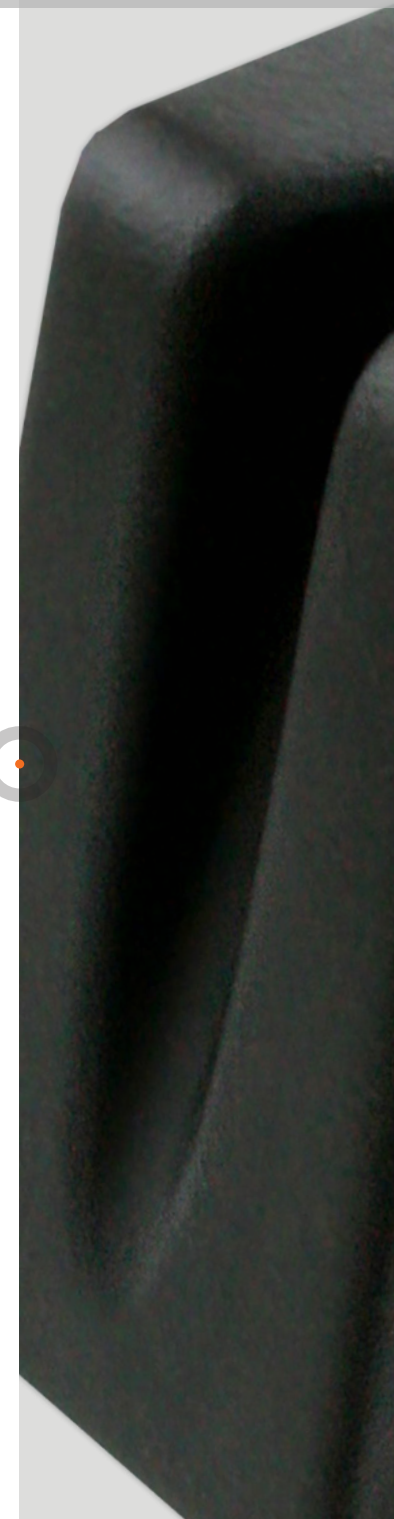

Badstofhoezen

ACCESSOIRES

| | | |
|---------|---|------------|
| 3445240 | Badstofhoes met neusgat | blauw |
| 3445241 | Badstofhoes met neusgat | bordeaux |
| 3445242 | Badstofhoes met neusgat | wit |
| 3445244 | Badstofhoes met neusgat | jade |
| 3445249 | Badstofhoes met neusgat | antraciet |
| 3445250 | Badstofhoes met neusgat | royal blue |
| 3445261 | Badstofhoes zonder neusgat | blauw |
| 3445034 | Badstofhoes zonder neusgat | bordeaux |
| 3445267 | Badstofhoes zonder neusgat | wit |
| 3445262 | Badstofhoes zonder neusgat | jade |
| 3445248 | Badstofhoes zonder neusgat | antraciet |
| 3445247 | Badstofhoes zonder neusgat | royal blue |
| 3445259 | Elastische bankhoesbretels, set van 3 stuks | |

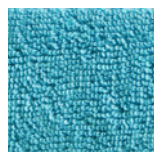

3445240
3445261



3445241
3445034



3445242
3445267



3445244
3445262




3445248
3445249



3445247
3445250



3445259

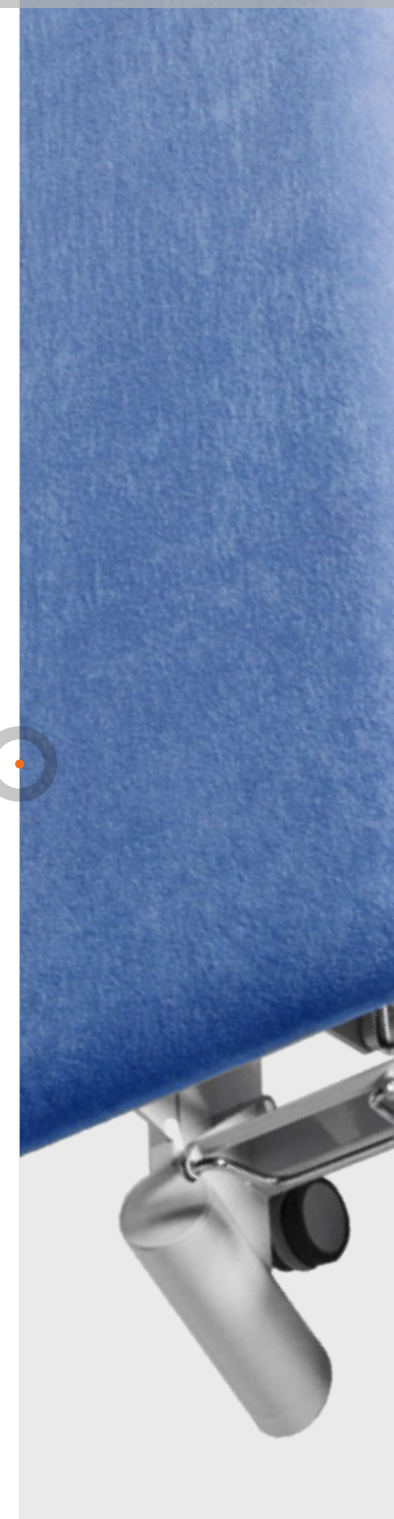



Manumed Tractie

Tractietherapie en behandeling
met een en dezelfde bank



Eltrac 471

Tractieapparaat voor
lumbale en cervicale tractie

Eltrac 471

Of er nu sprake is van een hernia, degeneratieve discopathie, of van een beknelde zenuw - spinale decompressie levert oplossingen voor langdurige pijnproblemen. Spinale decompressie kan op meerdere manieren worden bereikt, maar tractie is een van de eenvoudigste en effectiefste methodes. Door tractietherapie wordt de druk tussen de wervels beïnvloed. Door afname van de druk tijdens tractie realiseert men een mechanisch effect op de zenuwen en een biofysisch effect op de circulatie en zuurstofvoorziening van de locale structuren. Hierdoor kan onmiddellijk pijnverlichting bewerkstelligd worden, maar ook structurele verbetering voor op de lange termijn.

De Eltrac 471 is uw perfecte assistent voor tractietherapie. Decennia lang zijn vele patienten geholpen met de vertrouwde Eltrac 471. Nu is deze Eltrac 471 verbeterd. De Eltrac 471 is accuraat, makkelijk, real-time en verantwoord!



Eltrac 471

Accuraat

De nieuwe Eltrac is nauwkeurig. Met ultieme precisie worden de krachten op de patient uitgeoefend. Tijdens de tractie wordt trekkracht in het koord van de Eltrac 471 doorlopend gemeten. De sturing van de Eltrac vergelijkt de gemeten waarde met de ingestelde waarde. Eventuele verschillen worden ogenblikkelijk gecorrigeerd. Bewegingen van de patiënt worden gevolgd, waardoor deze geen invloed uitoefenen op de werkelijke trekkracht.

De Eltrac is ook extreem accuraat bij de weergave van de waardes van de tractietherapie. De daadwerkelijke krachten worden weergegeven, dus geen indicaties van een percentage van het motorvermogen of een voorspelde kracht, maar de werkelijk uitgeoefende kracht! En die accuratesse wordt weergegeven in de kleinst denkbare stapjes. Door in te zoomen op het display kunt u zien wat er werkelijk gebeurt!

Makkelijk

Dankzij de touch-screen en de intuïtieve interface is de nieuwe Eltrac 471 zeer makkelijk te bedienen. Een helder en overzichtelijk menu helpt u bij het maken van de therapeutische keuzes. Alle essentiële informatie wordt getoond. En niet alleen tijdens het instellen van de therapie, maar ook tijdens de uitvoering ervan. Bovendien kunnen de behandelprotocollen worden opgeslagen. Werkelijk alle combinaties kunnen aan de protocollenbibliotheek worden toegevoegd, zelfs protocollen die statische en intermitterende tractie in één enkele sessie combineren. Tot voor kort was dit niet mogelijk, echter dankzij de combinatie van statische en intermitterende tractie kunnen betere resultaten behaald worden. Alleen statische tractie is vaak te pijnlijk voor de patiënt, zeker in de acute fase waar tractie juist zo effectief kan zijn. Door statische en intermitterende tractie binnen één sessie te combineren kan een graduele toename gerealiseerd worden die onovertroffen is.





Eltrac 471

Real-time

Dat wat u ziet op het heldere en informatieve display is ook dat wat er daadwerkelijk plaatsvindt. Geen middelingen achteraf maar real-time. Zo kunt u de uitgeoefende krachten gedurende het verloop van de therapie zien. Dit stelt u in staat direct in te grijpen als dat nodig mocht zijn. Ook krijgt u zo een beter inzicht in het verloop van de gehele behandelsessie. Dankzij de real-time weergave bent u altijd op de hoogte.

Verantwoord

De Eltrac 471 van Enraf-Nonius is de verantwoorde keuze. Niet alleen omdat Enraf-Nonius al sinds 1925 apparatuur levert aan behandelaars van het bewegingsstelsel, maar ook omdat wij de technologische vooruitgang onderdeel maken van de behandelapparatuur. De traditionele apparatuur voor tractie wordt vooral gekenmerkt door een gecontroleerde tractiekracht. Met de nieuwe Eltrac 471 krijgt u bovenop deze gecontroleerde contractiekracht ook heldere real-time terugkoppeling, de mogelijkheid tot het opslaan van protocollen en het bediengemak dat de moderne technologie mogelijk maakt. Naast de mogelijkheid tot het opslaan van uw individuele protocollen is de Eltrac uiteraard voorzien van voorgeprogrammeerde protocollen. Dit maakt het instellen van de apparatuur heel eenvoudig.

Eltrac 471

Ergonomische vormgeving

Een ontwerp waar functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid voorop staan. Voor de therapeut het volledig overzicht en een heldere interface. Voor de patiënt de meest comfortabele fixatiemethode en een ontspannen uitgangshouding.

De nieuwe generatie

De Eltrac van Enraf-Nonius is de nieuwste generatie apparatuur voor tractietherapie. Dankzij de laatste technologische mogelijkheden, de recente wetenschappelijke inzichten en de jarenlange ervaring van Enraf-Nonius als ontwikkelaar van therapeutische apparatuur, weet u zeker dat u het beste in huis haalt met de nieuwe Eltrac 471.

Tractiebank ook inzetbaar als behandelbank

De rollende bladdelen voor tractie kunnen eenvoudig worden vastgezet. Uw tractiebank (type 916 en 926) is dan omgetoverd in een ideale behandelbank, hoog-laag verstelbaar en met een opklapbaar beendeel en wegklapbaar hoofddeel.

Makkelijk

Dankzij de touch-screen en de intuïtieve interface is de Eltrac zeer makkelijk te bedienen. Een helder en overzichtelijk menu helpt u bij het maken van de therapeutische keuzes. Alle essentiële informatie wordt getoond. De grafische ondersteuning met de mogelijkheid van zoomen en de directe terugkoppeling is onovertroffen.

Nauwkeurig

Krachten zijn uiterst nauwkeurig instelbaar. Niet een percentage van de motorkracht maar exact in stapjes van 1 N. of 10 N.



Eltrac 471

Snelheid in gebruik

De menu's en de keuzes zijn geoptimaliseerd voor snelheid en logisch gebruik. In de meeste gevallen bent u met 3 stappen al geheel pathologiespecifiek aan het werk! Snel en eenvoudig!

Meerrollende bladdelen

Het comfort tijdens de tractie is door meerrollende bladdelen gemaximaliseerd voor de patiënt. De krachten komen volledig ten goede aan de lumbale wervelkolom en verdwijnen niet in onaangename wrijving tussen patiënt en bank.

Accuraat

Terugkoppeling van de gemeten uitgeoefende krachten en directe correctie van afwijking waar nodig. Daarnaast past het apparaat de tractiekracht exact zo snel aan als u dat wilt.

Made by Enraf-Nonius

Enraf-Nonius staat voor veilig, betrouwbaar en duurzaam Een apparaat van Enraf-Nonius, dé leverancier voor de wereldwijde fysiotherapeut, is gemaakt met het oog op kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Krasvast helder TFT-scherm

Zeer fraai en helder full colour beeldscherm dat vanuit alle invalshoeken goede zichtbaarheid biedt op de instellingen en het programma.



Eltrac 471

Full colour touch-screen

Een gemakkelijke bediening met heldere menu's via het touch-screen. Zeer intuïtief en net zo makkelijk als de modernste smartphones.

Tractiebank met makkelijke bevestigingspunten

Met fixatiebarren zowel aan de zijkanten als aan het hoofdeinde biedt de Manumed Tractie de fixatiemogelijkheid voor elke tractie. Optimaal is het gebruik van het tractiegordel, maar ook de ondersteuning van diverse klittebanden tijdens het uitvoeren van de tractie wordt gemakkelijk op een Manumed Tractie.

Programmeerbaar

Naast de standaard aanwezige behandelprotocollen (inclusief sequentiële programma's) kunt u uw persoonlijke protocollen opslaan naar eigen inzicht. Elke denkbare combinatie - statisch, pro- en regressief, cyclisch of intermitterend - kan zo als persoonlijke favoriet worden opgeslagen.

Flexibankje voor een ideale uitgangshouding tijdens lumbale tractie

De hoog-laag instelbare flexistoel maakt het mogelijk om tractie uit te oefenen met ideale uitgangshouding waarbij de heuphoek 45 tot 90 graden gebogen kan zijn.

Accuraat, makkelijk, real-time en verantwoord




Eltrac 471

Klinische effecten van tractietherapie met de Eltrac



Pijnreductie

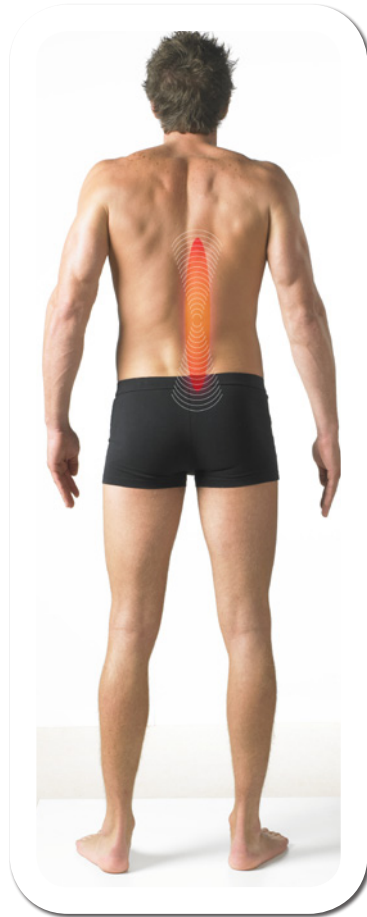


Afname spiertonus



Toename van de bewegings-
uitslag en flexibiliteit



Afname van discusprotrusie

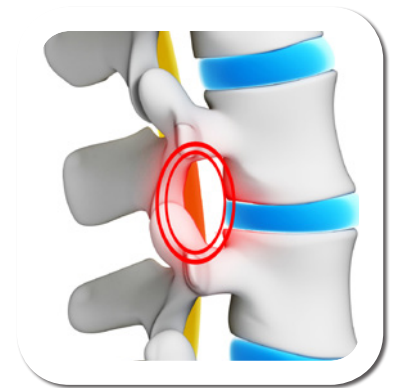

Decompressie van
beknelde zenuwen


Eltrac 471

1671901 Eltrac 471

Standaard accessoires


- 1471806 Nylon koord, 170 cm, met karabijnhaak
- 1471801 Set fixatieschroeven
- 1471800 Patiënten noodstop schakelaar
- 1471757 Bedieningshandleiding Eltrac 471 (CD-Rom)
- 1471756 Informatieboek Eltrac 471
- 3444290 Netsnoer 230V-EUR

BESTELGEGEVENS

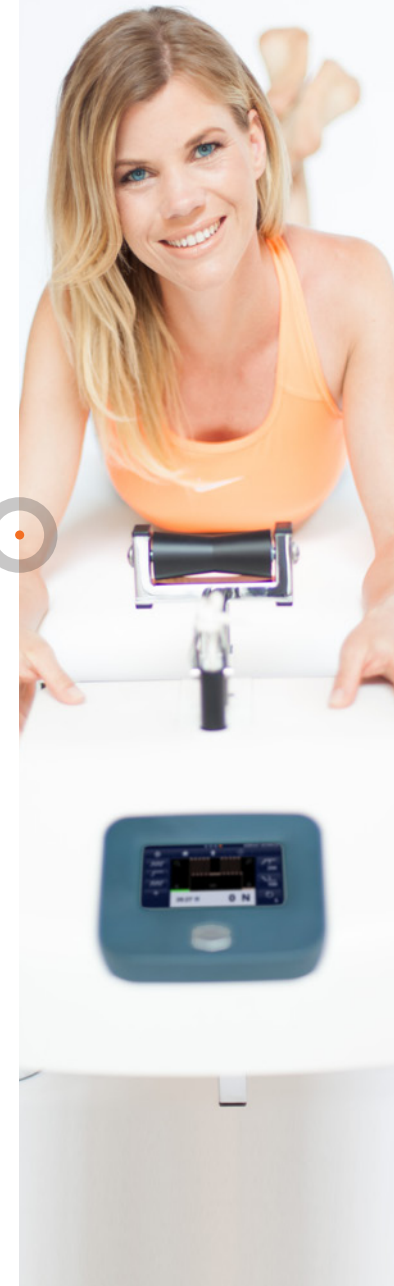

Eltrac 471

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|--|---|
| Therapievorm: | Statisch, Intermitterend, Pro- en Regressief, Cyclisch |
| Trekracht: | 15-900 N / 1.5-90 kg / 3.4-202 Lbs |
| Trekracht / basiskracht houdtijd: | 1 sec. – 1 uur (1 sec. intervallen) |
| Herhalingen (intermitterend en cyclisch): | 1-100 |
| Stappen hold time (pro- en regressie): | 1 sec. – 5 min. (1 sec. intervallen) |
| Stappen (pro- en regressief): | 1-25 |
| Snelheid : | 10 – 50 N/sec. (10 N intervallen) 0.1 – 5.0 kg/sec. 0.2 – 11.2 Lbs/sec. |
| Behandeltijd: | 1 sec. – 150 min. |
| Favorieten: | 100+ |
| Klinische protocollen: | Ja (3) |
| Sequentieel programmeren: | Ja (max 5 therapievormen) |
| Drempelwaarde voor veilig gebruik cervicale tractie: | 200 N / 20 kg / 45.2 Lbs |
| Touch screen: | 4.3 inch, full colour, capacitive |
| Netspanning: | 100 - 240 V (50/60 Hz) |
| Max. stroomopname: | 50 VA |
| Afmetingen: | 30 x 34 x 22 cm |
| Gewicht: | 10 kg |
| Dit is een medisch hulpmiddel. | Het voldoet aan alle toepasselijke medische voorschriften. Raadpleeg voor meer details de gebruiksaanwijzing (te downloaden via www.enraf-nonius.com).  |



Eltrac 471

ACCESSOIRES

- 5500926⁽¹⁾ Manumed Tractie 4-delig (type 926)⁽¹⁾
- 5500916⁽¹⁾ Manumed Tractie 4-delig (type 916)⁽¹⁾
- 3450500⁽¹⁾ Manumed Tractie 2-delig (type 004)⁽¹⁾
- xxxxxxx ManuXelect Tractie⁽²⁾



5500926

5500916



3450500



1471808

(1) = zie ook onze brochure Manumed Tractie voor alle opties en accessoires (te downloaden van www.enraf-nonius.nl)

(2) = zie ook onze brochure ManuXelect voor alle opties en en accessoires (te downloaden van www.enraf-nonius.nl)



Saunders klinisch tractie-apparaat

ACCESSOIRES


Cervicale tractie met het Saunders klinisch tractie-apparaat

Cervicale tractie kan zeer effectief zijn bij de behandeling van een cervicale hernia en bij condities waarbij verwijding van het foramen neurale of het rekken van de weke delen van de cervicale structuur gewenst is. Cervicale tractie is dankzij het Saunders klinisch tractie-apparaat eenvoudig en comfortabel.

Met het Saunders klinisch tractie-apparaat vindt de overdracht van de tractiekracht plaats op het dorsale deel van de schedel. Er worden geen krachten uitgeoefend op de kin, waardoor er geen belasting is van het temporo mandibulaire gewricht. Het Saunders klinisch tractie-apparaat kan individueel worden aangepast zodat het optimaal passend is voor elke patiënt.

De hoek waaronder de cervicale tractie plaatsvindt, is in te stellen met het Saunders klinisch tractie-apparaat. Hierdoor kan een optimale tractie worden geboden zoals die in de literatuur beschreven wordt.

De combinatie van de Eltrac 471 met een Enraf-Nonius tractiebank en het Saunders klinisch tractie-apparaat vormt de ideale oplossing voor eenieder die cervicale tractie op een verantwoorde, veilige en comfortabele manier wil uitvoeren.

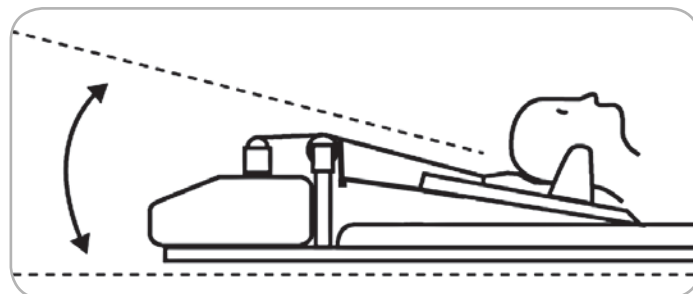

Saunders klinisch tractie-apparaat

ACCESSOIRES

1471808 Saunders Tractie-accessoire inclusief bevestigingsbeugel voor de Eltrac 471



147808



Eltrac 471

ACCESSOIRES

- 3xxx014 Flexibank, per been in hoogte instelbaar, beschikbaar in diverse kleuren
- 3447624 Glissonlis, gepolsterd, compleet met ophangbeugel
- 1471802 Katrol voor verrijdbaar tractieframe (2 stuks benodigd)
- 3445022 Tractiegordel heup voor de Manumed Tractie
- 3445021 Tractiegordel borst voor de Manumed Tractie
- 3445512 Mobiel tractieframe voor cervicale tractie
- 1471805 Wandrekbevestiging voor de Eltrac 471
- 3445038 Tractieframe voor de Manumed Tractie H/L type 916 en 926 (breedte 430 mm)
- 3445020⁽²⁾ Tractieframe voor de Manumed vaste hoogte type 004 (breedte 480 mm)



3013014



3447624



3445512



1471802



3445022



3445021



1471805



3445038



3445020





Eltrac 471



Tractieapparaat voor
lumbale en cervicale tractie

Enraf-Nonius B.V. | Vareseweg 127 | 3047 AT Rotterdam | The Netherlands
www.enraf-nonius.com | info@enraf-nonius.nl | + 31 - (0) 10 20 30 600



PARTNER FOR LIFE