



WESSELING BV

made in Holland since 1958



CE

BOBATH ELITE

Als het een maatje meer mag zijn

Inhoudsopgave

Bobath Elite, groots in formaat en mogelijkheden.....	1
Productkenmerken Bobath Elite.....	2
Bobath 1 Elite.....	3
Bobath 2 Elite Head Section	4
Bobath 2 Elite Back Section	5
Opties & Accessoires	6
Kleuren & leersoorten	8

Bobath Elite, groots in formaat en mogelijkheden.

De Bobath tafel staat algemeen bekend als een grote behandeltafel. De naam is niets minder dan de achternamen van de bedenkers van het Bobath Concept. Een concept of therapie waarbij veel bewogen dient te worden en waarvoor de dus een groot behandeloppervlak wenselijk is. Met de keuze uit 3 verschillende modellen en 4 verschillende maten kunnen we altijd een tafel leveren die bij uw behandeling past.

Het schaarframe zorgt ondanks de afmeting voor een minimale voetafdruk, en hiermee is de Bobath Elite uitermate geschikt voor de compacte behandelruimte

De bedieningen zijn gemakkelijk te vinden en eenvoudig in gebruik. Het systeem met twee, speciaal geproduceerde gasveren ondersteunen uw patiënt en zijn zeer licht verstelbaar.

Op zoek naar een grote en veelzijdige behandeltafel, dan is de Bobath Elite de beste keuze.

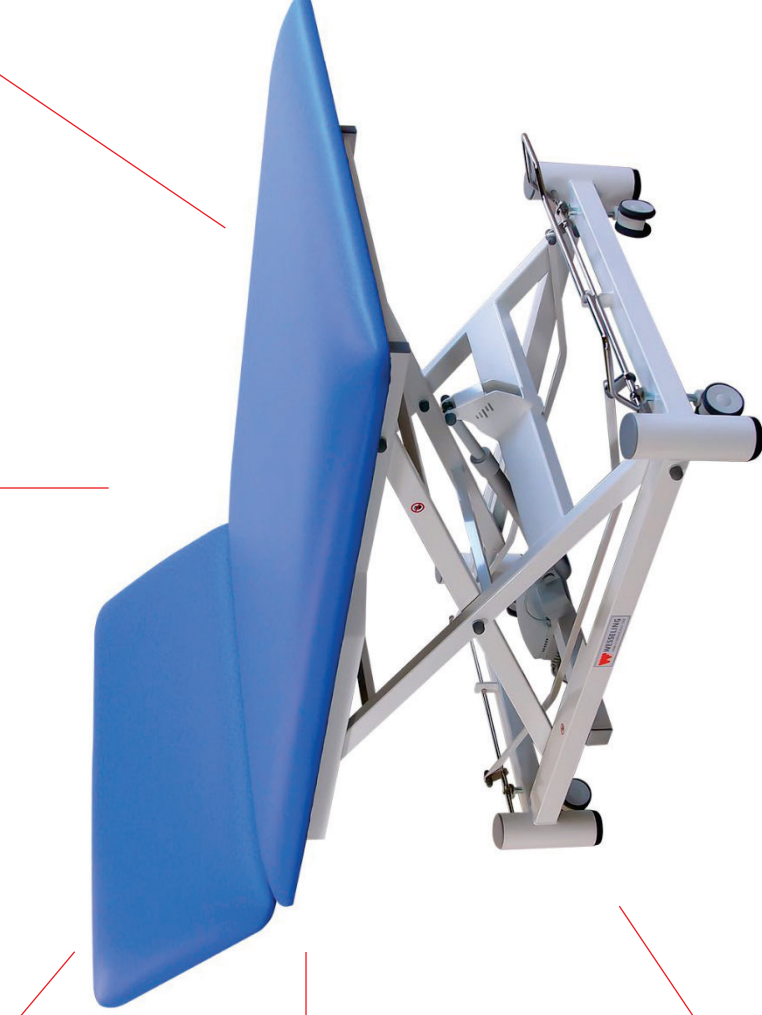
Productkenmerken Bobath Elite

Ook verkrijgbaar met langere, comfortabele rugleuning



Dubbel gasveer systeem onder hoofd-, of rugdeel

Standaard patiënten gewicht van maximaal 200kg



Alle modellen zijn uit te voeren met een rondomsysteem, waarmee de tafel in hoogte kan worden verstelt. De voetschakelaar en dus ook het losse snoer komen te vervallen.



Traploze en lichte verstelling van de gasveren is mogelijk door de hendels aan beide zijden van de tafel



Polstering 60mm zorgt voor veel comfort voor de patiënt.

Zeer eenvoudig te verplaatsen door centraal wielhefsysteem en wielen van 75mm



Met behulp van de verhogingset onderrijdbaar tot 17cm voor gebruik met patiëntenlift



Grote ronde poten zijn voorzien voor uitdraaibare doppen voorzien van antislip. Hierdoor staat de tafel zeer stabiel en voorkomt ongewenste bewegingen.

Standaard voorzien van voetschakelaar



Bobath 1 Elite



Hekken

Verhogingsset

Purfect bekleding

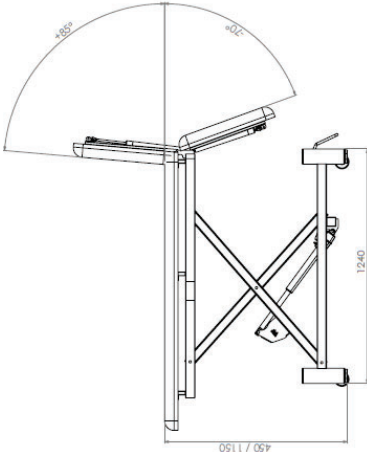
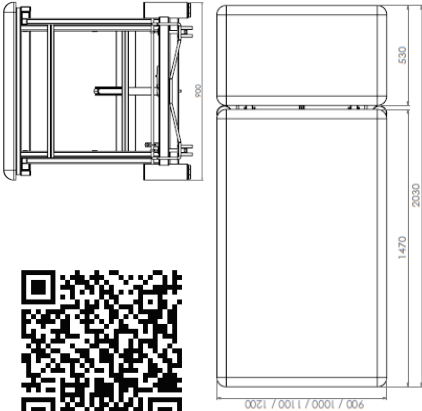
Dikkere bekleding

70mm

rondomschakeling

Specificaties:	Producteigenschappen:	Artikelcodes:
Maximale hefvermogen	• Rechtstandige hoog/laag beweging	Electric adjustable
Maximale belasting	• Standaard met wielen en centraal wielhefsysteem	Electric adjustable
Polstering	• 1-delig ligvlak zonder sticknaden	Hydraulic adjustable
Wielen	• Unieke laagste stand 42cm en hoogste stand 112cm	Hydraulic adjustable
	• Verkrijgbaar in de maten 90,100,110 of 120cm breed	

Bobath 2 Elite Head Section





Specificaties:	Producteigenschappen:	Artikelcodes:
Maximale hefvermogen	• Rechtstandige hoog/laag beweging	Elektrisch verstelbaar
Maximale belasting	• Standaard met wielen en centraal wielhefsysteem	Elektrisch verstelbaar
Polstering	• Hoofddeel kan ook negatief worden gepositioneerd	Hydraulisch verstelbaar
Wielen	• Unieke laagste stand 42cm en hoogste stand 112cm	Hydraulisch verstelbaar
Verstelling hoofddeel	• Uitgebreid keuze mogelijkheid kleuren en accessoires	

Bobath 2 Elite Back Section

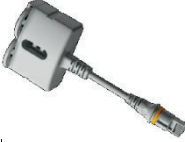


Specificaties:	Producteigenschappen:		Artikelcodes:	
Maximale hefvermogen	175kg	• Rechtstandige hoog/laag beweging	Elektrisch verstelbaar	BOB2BE90/100
Maximale belasting	350kg	• Standaard met wielen en centraal wielhefsysteem	Elektrisch verstelbaar	BOB2BE110/120
Polstering	60mm	• Comfortabele rugleuning van 81cm	Hydraulisch verstelbaar	BOB2BH90/100
Wielen	75mm dubbelrol	• Dubbel gasveer systeem voor extra stabiliteit	Hydraulisch verstelbaar	BOB2BH110/120
Verstelling rugdeel	2 Gasveren	• Unieke laagste stand 42cm en hoogste stand 112cm		

Hekken	Neusgat	Purfect bekleding	Verhogingset	Rondomschakelaar
--------	---------	-------------------	--------------	------------------

Opties & Accessoires

De tafels uit de Bobath lijn zijn uit te voeren met verschillende opties en accessoires om het gebruiksgemak en het comfort te optimaliseren. Hieronder vindt u alle mogelijk opties. Let op dat een aantal opties alleen geschikt zijn voor een bepaald model, en dit zal dan ook vermeld staan. Daarnaast zijn diverse opties alleen te gebruiken in combinatie met een andere product, en ook dit zal dan vermeld staan.

Omschrijving	Productcode	Afbeelding
Papierrolhouder	PAPBOE00	
Koppeling voor extra schakelaar	TSTUK00	
Extra handschakelaar, alleen te gebruiken met TSTUK00	HSCH010	
Extra voetschakelaar, alleen te gebruiken met TSTUK00	VSCH08	
Rondomschakeling	RANDOM10	
Houder voor voetschakelaar	ADAPVVSCH00	

Omschrijving	Productcode	Afbeelding
Neusgat, incl. vulkussen	NEUS002	
Voetenmat	VOETENMAT	
Purfect bekleding voor behandeltafel	PURFECT01	
Purfect bekleding voor kussens/krukjes	PURFECT02	
Dikkere bekleding 70mm	DIKKER00	
Traagschuim verwerkt in bekleding	LAZYFOAM00	

Wegklapbare hekken	HEKKEN02	
Verhogingset, onderrijdbaarheid 17cm	VERHOGING	
Anti-collision systeem	ACS 00	
Veiligheidsschakelaar voor behandeltafel	SPERRBOX	

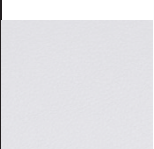
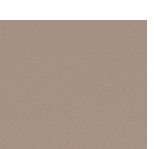
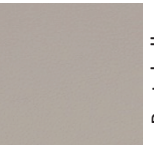
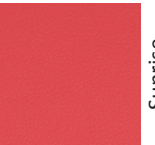
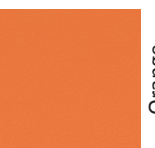
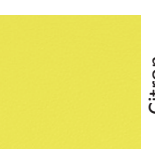
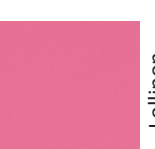
Aardpotentiaalvereffeningspunt	AARDP00	
Aardekabel	KABELAARD	
Handschakelaar met veiligheidsschakelaar	VSCH011	

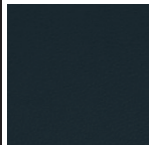
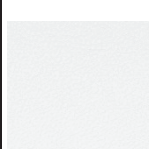
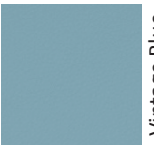
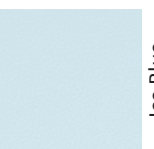
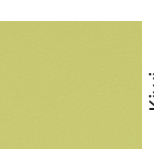
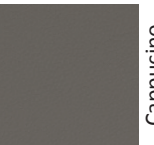
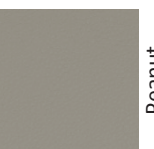
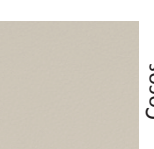
Kleuren & leersoorten

Standaard worden de tafels afgewerkt met een kunstleer op basis van PVC uit de Fresh kleurenlijn. Er zijn 34 kleuren beschikbaar zonder extra kosten om de tafel af te kunnen stemmen met uw behandelruimte. Op deze manier creëert u een nog prettigere werkomgeving. Dit type kunstleer mag niet met alcohol worden schoongemaakt. Daarnaast hebben we de Purfect kleurenlijn op basis van PU en deze mag wel met alcohol worden gedesinfecteerd. Ook hier is weer een ruime keuze aan kleuren om ervoor te zorgen dat de tafel niet alleen functioneel is maar ook een lust voor het oog.

Op onze website vindt u meer informatie over deze leersoorten en het schoonmaken ervan. Ook is er een lijst beschikbaar met geschikte schoonmaakmiddelen. Vanuit Wesseling bieden wij ook schoonmaak- en desinfectie middelen aan, te weten Tevan Panox en de Soapopular.

Hieronder een greep uit het ruime assortiment kleuren (let op dat onderstaande afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke kleuren):

Fresh			
			
Black	Titanium	Atomium	Crystal
			
Marine	Ocean	Aqua	Pagode Blue
			
Teal	Ice Blue	Taupe	Lounge
			
Portobello	Bark	Zest	Grass
			
Sunrise	Orange	Citron	Lollipop

Purfect			
			
Black	Cold Lava	Concrete	Snow White
			
Iron	Majestic Blue	Babyton	Florence
			
Vintage Blue	Ice Blue	Pepper Mint	Kiwi
			
Cappuccino	Peanut	Fudge	Cocos
			
Ginger	Henna	Mustard	Cranberry