



KOMPAKTE UNTERSUCHUNGS-LIEGE
COMPACTE ONDERZOEKSTAFEL

Ritter® 204



Ritter®
by MIDMARK

Vers.: 12-2013



Ritter® 204

“ICH MÖCHTE EINEN KOMPLETTEN
UNTERSUCHUNGSTISCH,
DER AUF 1 M² PASST”
“IK ZOEK EEN COMPLETE TAFEL
DIE OP 1 M² PAST”

KOMFORT / COMFORT

- Breite Polsterung mit integrierter Kopfstütze
- Voll ausziehbare Schubladen, beidseitig zugänglich (Möglichkeit, die Liege in der Zimmermitte aufzustellen)
- 5 Schubladen für Ihren gesamten Ablagebedarf: 3 seitliche, 2 frontale Schubladen
- Einklappbare, integrierte Haltebügel
- Sitzneigung 5° (tilt)
- Breite Auswahl an Polsterungen (Formen und Farben, Midmark oder Promotal)
- Papierhaltegurt
- Brede bekleding met ingebouwde hoofdsteen
- Volledig uitschuifbare laden die aan beide kanten toegankelijk zijn (mogelijkheid om de tafel midden in het kabinet te plaatsen)
 - 5 laden om alles ordelijk in op te bergen: 3 opzij, 2 vooraan
 - Ingebouwde uitschuifbare hielsteunen
 - Zithelling 5° (tilt)
 - Ruim gamma van bekledingen (vormen en kleuren, Midmark of Promotal)
 - Riem voor bevestiging van papier

 **84 cm**
Höhe mit
Polsterung
Hoogte
inclusief
bekleding

Länge mit
ausgezogener Beinauflage
Lengte incl. uitgeschoven
kniesteun
 **193 cm**

Belastbarkeit / Draagvermogen
 **225 kg**

Gezeigtes Modell mit
Optionen/Zubehör
Model weergegeven
met opties/accessoires

HYGIENE HYGIËNE

- Einteilig geformte ABS-Schubladen mit abgerundeten Winkeln für leichtere Reinigung
- Abnehmbare, einteilige, nahtlose Polsterung
- Alle Oberflächen sind pflegeleicht
- In das Rückenteil integrierter Rollenhalter
- Abnehmbare, gynäkologische Wanne aus ABS, sterilisierbar
- In een stuk uit ABS gegoten laden met afgeronde hoeken om gemakkelijker schoon te maken
 - Naadloze afneembare bekleding uit een geheel
 - Alle oppervlakken zijn vlot toegankelijk voor schoonmaak
 - In rugleuning ingebouwde papierrolhouder
 - Afneembare steriliseerbare pan uit ABS



SICHERHEIT VEILIGHEID

- Belastbarkeit bis zu 225 kg
- Verstellbare Gleiter an der Unterseite
- Trittbrett mit intervallgebremsten Rollen
- Draagvermogen patiënt 225 kg
- Stelvoetjes onder de basis
 - Opstap met zelfblokkerende wielen

ZUGÄNGLICHKEIT / TOEGANKELIJKHEID

- Ausziehbarer integrierter Stufentritt
- Polsterung mit 100% Nutzbreite, leichter Rand und unterer Abschluss für besser Fußauflage
- Ausziehbares Beinpolster (Ganzkörperuntersuchung)
 - Ingebouwde uitschuifbare opstap
 - Nuttige breedte 100% van de bekleding met licht uitstekende rand en aan de basis voetenbank
 - Uitschuifbaar kussen voor benen (algemeen onderzoek)



Seitenansicht
Profil

STANDARDAUSFÜHRUNG

Mit Gasfeder verstellbares Rückenteil
 Manuell verstellbarer Sitz
 Abnehmbare Polsterung
 Einschiebbare Fußpolsterung
 Gestell aus Stahl, Epoxidbeschichtung
 5 einteilige Polystyrol-Schubladen (davon 3 mit seitlicher Öffnung),
 (Schienenführung)
 Ausziehbarer Stufentritt aus Stahl mit intervallgebremsten Rollen
 Integrierte Haltebügel, einklappbar und verstellbar
 Becken aus ABS
 Papierrollenhalter (max. Länge 50 cm - ø 12 cm)
 Höhe mit Polsterung 84 cm
 Länge mit ausgezogener Beinauflage 193 cm

STANDAARDEIGENSCHAPPEN

Rugleuning kantelbaar met gasveer
 Handmatig kantelbare zitting
 Afneembare bekleding
 Uit/inschuifbaar voetkussen
 Vervaardigd uit staal met epoxycoating
 5 polystyreen laden uit een stuk (waarvan 3 met zijdelingse opening),
 (op geleiders)
 Stalen uitschuifbare opstap met zelfblokkerende wielen
 Ingebouwde uittrekbare en verstelbare beugels
 Waskom uit ABS
 Papierrolhouder (max. lengte 50 cm - ø 12 cm)
 Hoogte incl. bekleding 84 cm
 Lengte incl. uitgeschoven kniesteun 193 cm

Modelle (Untergestell + Polster) Modellen (Basis + bekleding)	Steckdose Uitsparing voor stekker	Schubladenheizung Verwarmingslade	Mit Soft Touch Polsterung Met Soft Touch-bekleding	Mit nahtloser Polsterung Naadloze bekleding	Mit Promotal Farbe Polsterung Met bekleding Promotal-kleuren
204-005 + 002-0870			●		
204-005 + 002-0871				●	
204-005 + 002-0872					●
204-006 + 002-0870	●		●		
204-006 + 002-0871	●			●	
204-006 + 002-0872	●				●

Optionen*/Opties*

* Bitte unbedingt bei der Bestellung
 angeben, Montage im Werk! /
 Meedelen bij bestelling,
 montage in fabriek

9A410004



Beinstützen
Kniesteunen

9A314001+9A354002



Paar verstellbare Armauflage
 Paar instelbare armsteunen
 A400
 +9A354002 9A35400
 +9A354002 9P351001

9A354001+9A354002



Paar Hilfsgriffe
 Paar hulphandgrepen

9P351001



Halter für Zubehör ø 16 mm
 (nicht mit anderen Optionen
 kombinierbar)
 Houder voor accessoires
 ø 16 mm
 (Incompatibel met alle andere
 opties)

Zubehör Accessoires

2985-01+9P351001



Infusionshalter
Infuushouder

Lighttec +9P351001



Siehe Dokumentation
 Zie documentatie



Polsterauswahl, feuerbeständig M1,
antibakteriell
Keuze voor M1vuurvertragende
stoffering – Bacteriewerend

Classic

32 - BLUE

93 - COTTAGE

35 - RED

34 - YELLOW

91 - WHITE

92 - MARINE

56 - DARKNESS

57 - ANTISTATIC
Keine Einstufung nach Brandschutzklasse M1
Niet M1-ingedeeld

Vitamin

64 - GRAPE

67 - LAGOON

66 - SWEET

63 - CEDRAT

Cosy

80 - SKY

81 - SEA GREEN

65 - LILAC

96 - TIN

82 - MOUSE GREY

83 - NATURAL

84 - CHOCOLATE


ANTIBAKTERIEEL / FEUERBESTÄNDIG KL. M1 – BACTERIEWEREND / BRANDVEILIG M1



Netto-Gew.
Nettogewicht
113 kg

Brutto-Gew.
Brutogewicht
125 kg

Volumen
Volume
1,00 m³

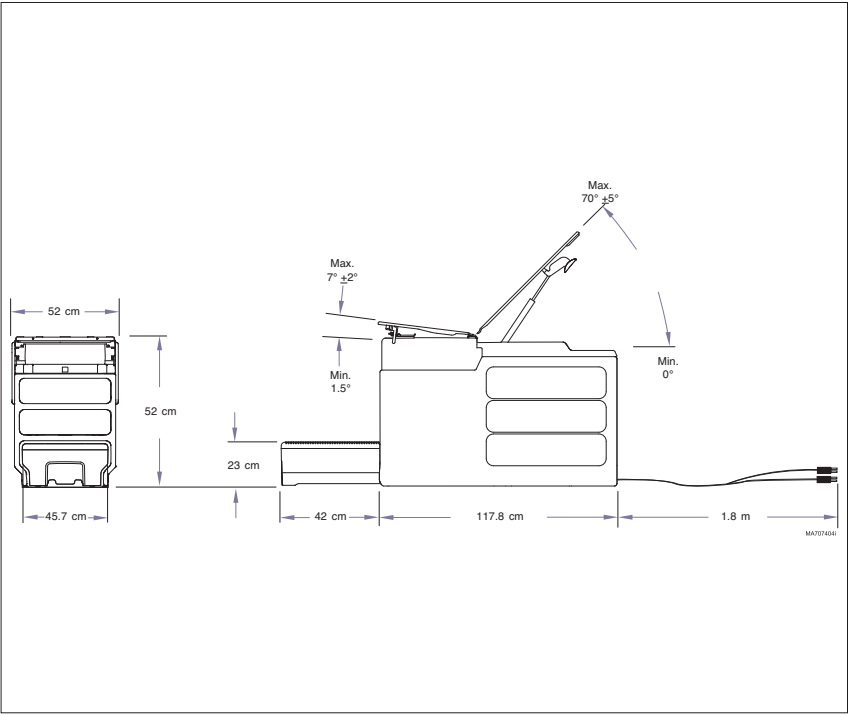

AH-49/13